



COBI REHAB®
The Positioning Company

XXL-Rehab Arbejdsstol

XXL-Rehab Office Chair

Anvendelse
Use

Max 275 kg

Brugsanvisning
User manual

DK

Kan med fordel anvendes til:

- Bariatriske brugere op til 275 kg.

UK

Ideal use for:

- Bariatric users weighing up to 275 kg.



Brugsanvisning for XXL-Rehab Arbejdsstol



ADVARSEL

Dette produkt må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale.

Bruges produktet til personer, der vejer mere end den maksimale brugervægt, er der risiko for at beskadige produktet.

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert installation, forkert montering eller forkert anvendelse af dette produkt.

Hvis dele er beskadiget eller mangler, kontakt Cobi Rehab med det samme. Brug IKKE erstatnings reservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller ulykker, der opstår efter reparationer uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.

⚠ For at sikre korrekt brug af XXL-Rehab Arbejdsstol skal brugsanvisningen læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt mod advarslerne mærket med ⚠.

Desuden må stolen kun betjenes af uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i dens brug, da der ellers er fare for, at brugeren kan komme til skade.

Sikkerhedsvejledninger

- ⚠ Stolen må kun bruges af den person og til det formål, som den er beregnet til.
- ⚠ Stolen er beregnet til brug inden døre og må ikke udsættes for vand, andre væsker eller kemikalier.
- ⚠ Stolen må ikke udsættes for høj varme eller langvarigt og intensivt sollys eller anden stråling.

Anvendelse

XXL-Rehab Arbejdsstol er komfortabel og giver god aflastning, så unødigt slitage på kroppen undgås. Arbejdsstolens sæde er godt polstret, hvilket giver god trykaflastning samt en komfortabel siddestilling igennem længere tid for bariatriske brugere op til 275 kg.

Med el-sædehejsset og de letløbende hjul kan brugeren forflytte sig både horisontalt og vertikalt, hvilket gør det lettere at leve et aktivt liv i hjemmet.

⚠ Bruges produktet til personer, der vejer mere end 275 kg kan der opstå risiko for at stolen vælter eller bliver beskadiget.

Beskrivelse

XXL-Rehab Arbejdsstol er komfortabel og giver god aflastning, så unødigt slitage på kroppen undgås.

Med el-sædehejsset og de letløbende hjul kan brugeren forflytte sig både horisontalt og vertikalt, hvilket gør det lettere at leve et aktivt liv i hjemmet.

Dobbelt el-hejs

XXL-Rehab Arbejdsstol har elektrisk højdejustering med dobbelte cylindre, som gør hejsset ekstra stærkt. Hejsset har et løftespænd på henholdsvis 20 eller 28 cm, som gør stolen nem at indstille til den korrekte arbejds højde ved et køkkenbord eller spisebord. El-hejsset betjenes let med et tryk på en knap placeret under armlænet.

Stærk konstruktion

XXL-Rehab Arbejdsstol har en stærk krydsramme konstruktion, holdbare hjul med meget letkørende SKF lejer og en vægtkapacitet på 275 kg. Stolen har manuel håndbetjent bremse.

Komfortabelt sæde

Arbejdsstolens sæde er godt polstret, hvilket giver god trykaflastning samt en komfortabel siddestilling igennem længere tid. Ryglænet er forstærket og monteret på 2 parallelle rør, der kan indstilles i vinkel og dybde. Armlænene kan slås ned og har trinløs indstilling med konisk spor, som sikrer, at de aldrig går løs.

Betræk


Arbejdsstolen leveres med kraftigt møbelbetræk, som er smudsafvisende og brandhæmmende.

Tilpasning til brugeren

De følgende anvisninger forklarer, hvordan XXL-Rehab Arbejdsstolen kan tilpasses til den enkelte bruger.


Rygstød

Rygmekanismerne har separate reguleringer til højde (1) og vinkel (2). Løsn grebene på begge rygmekanismer, indstil den ønskede højde og vinkel, og lås derefter grebene igen. Medicmodellen kan justeres i dybden med grebet (3). Vinklen på selve ryggen justeres med grebet (4).

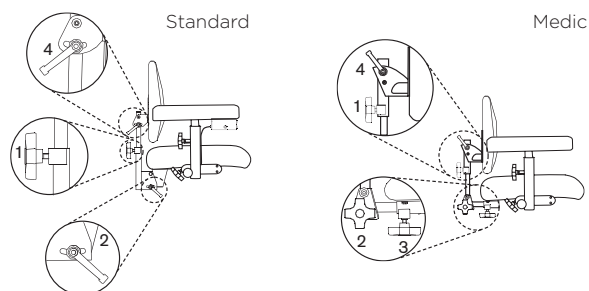

Armlæn


Armlænenene kan justeres i højde og bredde og vippes bagud. Højden justeres med knappen (1). Sænk armlænet ved at skrue knappen udad. Hæv den ved at løfte armlænet til den ønskede højde og derefter låse knappen. Bredden låses med knappen (2). Løsn knappen, indstil den, og lås. Vipningen styres med knappen (3). Træk den ud, og vip bagud. Anordningen låses automatisk, når armlænet vippes tilbage til lodret stilling. Den automatiske låsning kan forhindres ved at dreje knappen (3) en kvart omgang.

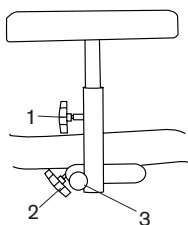

Siddehøjde

Siddehøjden justeres med vippeafbryderen (1) under det ene armlæn.


Hæv sædet ved at trykke på strømafbryderens øverste del. Sænk det ved at trykke på strømafbryderens nederste del.

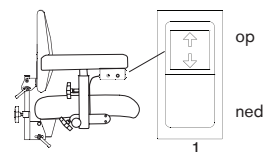

Håndbremse

Højden reguleres med stangen (1) ved armlænets ene side (standard højre).

Løft stangen for at ændre højdeindstillingen.

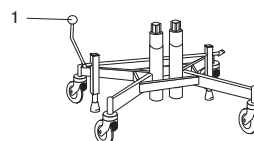

Scan koden og få flere produktinformationer.

HYDRA 47000 fra hennelsson.dk

Vedligeholdelse og rengøring

Jævnlig rengøring af alle flader på kørestolen vil sikre, at den bliver ved at se pæn ud og holder længere.

Af stolen og betræk

- Tør stolen af med en tør ren klud.
- Vask betrækket med et møbelvaskemiddel.
- Af hygiejniske grunde skal siddeplade og polstring også skiftes ud, når betrækket skiftes.
- Sæde, rygstød og øvrige polstrede dele er af funktionelle grunde ikke fremstillet af massivt materiale.

Af el-løfteanordningen

- El-løfteanordningen skal jævnligt kontrolleres for støv og snavs: Kør siddepladen op til højeste stilling. Gør den ren med en klud.
- Smør derefter cylinderen med et tyndt lag teflon- eller silikonebaseret smøremiddel. Denne type smøremiddel pletter ikke ligesom mineraloliebaseret fedt.

⚠ Der må ikke bruges vand eller opløsningsmiddel i forbindelse med rengøring af el-løfteanordningen.

Garanti

Cobi Rehab garanterer, at produktet er fejlfrit, når det leveres. Hvis der på nogen måde er en mangel eller skade på produktet, når det modtages, skal De omgående rette henvendelse til Cobi Rehab.

Garantiperioden for produktet er 1 år fra købsdato. Fakturaen er "garantibevis".

Der ydes ikke garanti på produkter hvor serienummer, batch nummer eller lignende er blevet fjernet eller beskadiget væsentligt, eller på produkter, hvor der er foretaget reparation af uautoriseret personale eller hvis Cobi Rehab vurderer, at produktet er blevet håndteret på en ureglementeret måde. Denne vurdering foretager Cobi Rehab.

Denne garanti dækker IKKE normal vedligeholdelse så som rengøring, tilpasning, smøring og opdatering af udstyr eller dele. Hvis en skade er opstået på grund af ukorrekt brug vil der blive faktureret en pris for service og anvendte reservedele.

Garantien ovenfor er den eneste gældende garanti. Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlige for skader af nogen slags.



CE mærket i henhold til 93/42/CE direktiv (klasse 1) og CEI EN 60601-2-38; UNI EN 1970:2006; 2006/42/CE; CND: z12030799 - RDM: 106290/R - GMDN: 35563

Specifikationer

Brugervægt max.	275 kg
Stelbredde	56 cm
Sædebredde	62 / 72 cm
Sædedybde	40 / 45 / 50 cm
Sædehøjde	44-64 / 51-79 cm
Rygbredde	46 / 66 cm
Ryghøjde	43 cm
Armlæn trinløs indstilling	25-35 cm
Armlæn breddeindstillelige	Ja
Vægt	Ca. 40 kg
Brandhæmmende betræk	Ja
Farve betræk	Grå
Ramme	Pulverlakeret stål
Løftesystem	Heavy-duty aktuator
Hjul	100 mm grå polyuretan
Betræk	100% polyester
Lader	230V
ISO - klassifikation	ISO 18 09 03 - 12

PRODUCENT

Mercado Medic
Tryffelslingan 14
S-181 57 Lidingö

FORHANDLER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf.: +45 70 25 25 22
www.cobirehab.com

04/2018/JP

Instructions for using XXL-Rehab Office Chair

CAUTION

This product should not be used without proper instruction from a healthcare professional.

Using the product for individuals weighing more than the maximum weight-bearing capacity may pose a risk for damaging the product.

Cobi Rehab assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.

If components are damaged or missing, contact Cobi Rehab immediately. Do NOT use substitute parts.

Cobi Rehab cannot be held liable for faults or accidents occurring after repairs by service staff without written authorisation from Cobi Rehab.

 To ensure proper use of the XXL-Rehab Office Chair, please read these instructions thoroughly before using the product. In doing so, pay particular attention to the warning notes marked with .

Also remember that in order to prevent the risk of injury to the user, the chair may be operated only by trained caregivers or aides or by individuals who have been instructed in its proper use.

Safety notes

-  The chair must be used only by the person and for the purpose for which it is intended.
-  The chair is designed for indoor use and should not be exposed to water, other liquids or chemicals.
-  The chair should not be exposed to excessive heat or long and intensive sunlight or other radiation.

Use

XXL-Rehab Office Chair is comfortable and provides good working positions at any place. The seat is well padded, providing good pressure relief and a comfortable sitting position for a long time for bariatric users weighing up to 275 kg.

The user can transfer vertically due to the electric seat hoist and the smooth-running wheels, making it easier to live an active life at home.

 Using the product for individuals weighing more than 275 kg may pose a risk of tipping or damaging the chair.

Description

XXL-Rehab Office Chair is comfortable and provides good working positions at any place.

The user can transfer vertically due to the electric seat hoist and the smooth-running wheels, making it easier to live an active life at home.

Double electric

XXL-Rehab Office Chair has electric height adjustment with double cylinders which makes the hoist extra strong. The hoist has a lift span of either 20 or 28 cm which makes the chair easy to adjust to the correct working height at a kitchen or dinner table. The electric hoist is easy to operate pushing the button located under the armrest.

Strong construction

The chair has a strong safety construction, durable wheels with heavy duty bearings easy to drive and a weight capacity of 275 kg.

The chair has a hand operated brake.

Comfortable seat

The seat is well padded, providing good pressure relief and a comfortable sitting position for a long time. The backrest is reinforced and mounted on a tube which can be adjusted in angle and depth. The armrests can be folded down and have continuously adjustable conical track, ensuring that they never detach.

Cover


The office chair comes with strong upholstery that is stain resistant and fire retardant.

User customisation

The following instructions explain how the XXL-Rehab Office Chair can be customized to the user.


Backrest

The back rest mechanisms have separate controls for height (1) and angle (2). Loosen the levers on both back mechanisms, set the desired height and angle, and then lock the levers again. The medic model can be adjusted in depth with the lever (3). The angle of the spine can be adjusted with the lever (4).

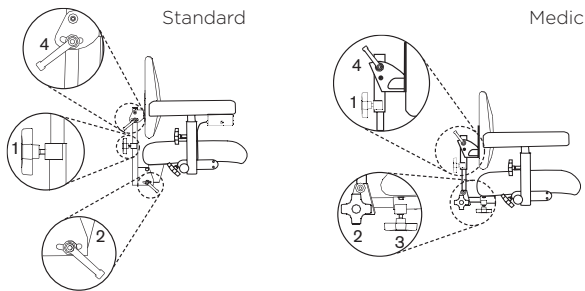

Armrests


The armrests can be adjusted in height and width and tilted backwards. The height is adjusted with button (1). Lower the armrest by turning the button outwardly. Raise it by lifting the armrest to the desired height and then lock button. The width is locked with button (2). Release the button, set it and lock. The tilting is controlled with button (3). Pull it out, and tilt rearwardly. The device automatically locks when the armrest is tilted back to the vertical position. The automatic locking can be prevented by turning (3) button a quarter turn.

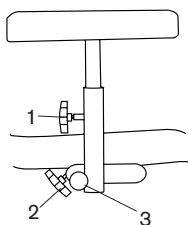

Seat height


The seat height is adjusted with the toggle switch (1) under one armrest.

Raise the seat by pressing the upper part of the power breaker. Decrease by pressing the lower part of the power breaker.

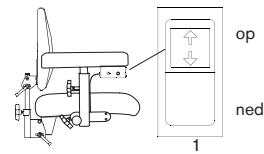

Hand brake

The height is adjusted with the bar (1) at one side of the armrest (standard right). Lift the lever to change the height setting.

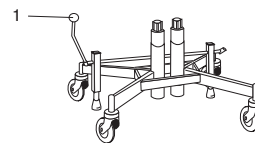

Maintenance and cleaning

Regular cleaning of all surfaces of the XXL-Rehab Office Chair will ensure that it continues to look nice and lasts longer.

Of the chair and cover

- Wipe the chair with a dry clean cloth.
- Wash the cover with a furniture detergent.
- For hygienic reasons the seat and padding must also be replaced when the cover is changed.
- Seat, backrest and other upholstered parts are for functional reasons not made of solid material.

Of the electric lifting device

- The electric lifting device must be checked regularly for dirt or dust:
Run up the seat to the highest position. Clean it with a cloth.
- Lubricate then the cylinder with a thin layer of teflon or silicone based lubricant. This type of lubricant does not stain as petroleum-derived fat.

 Do not use water or solvent when cleaning the electric lifting device.

Warranty

The XXL-Rehab Office Chair is covered by one year warranty from the invoice date for materials and workmanship.

Products which have been used for purposes other than the intended use; or which have been subject to negligence, abuse, improper storage or handling, improper operation, unauthorized modifications or damages beyond normal wear and tear as determined by Cobi Rehab, are not covered by this warranty.

If weight capacity is exceeded, the warranty will be void.

Any unauthorized repairs to product / part, as well as tampering with any components, will void the warranty.



XXL-Rehab Office Chair is manufactured and tested in accordance with the 93/42/CE directive (class 1) and CEI EN 60601-2-38; UNI EN 1970:2006; 2006/42/CE; CND: z12030799 – RDM: 106290/R – GMDN: 35563.

Specifications

Maximum weight capacity is	275 kg
Frame width	56 cm
Seat width	62 / 72 cm
Seat depth	40 / 45 / 50 cm
Seat height	44-64 / 51-79 cm
Backrest width	46 / 66 cm
Backrest height	43 cm
Adjustable armrest in width	Yes
Adjustable armrest	25-35 cm
Weight	Approx. 40 kg
Cover colour	Grey
Fire retardent cover	Yes
Frame	Powder coated steel
Lifting system	Heavy-duty actuator
Castor	100 mm polyurethane
Cover	100% polyester
Charger	230V
ISO – classification	ISO 18 09 03 - 12

MANUFACTURER

Mercado Medic
Tryffelslingan 14
S-181 57 Lidingö

DEALER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Denmark
Tel.: +45 70 25 25 22
www.cobirehab.com

04/2018/JP



COBI REHAB[®]

The Positioning Company

COBI REHAB

Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Denmark

Tel. +45 7025 2522

www.cobirehab.com