



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

XXL-Rehab Comfort skummadras

XXL-Rehab Comfort foam mattress

Anvendelse
Use

Max 325 kg

Brugsanvisning
User manual

DK

Kan med fordel anvendes til:

- Bariatriske brugere som vejer op til 325 kg, og hvor man ønsker at bibeholde deres mobilitet, samtidig med de får en trykaflastende liggeflade.

UK

Ideal use for:

- Bariatric users weighing up to 325 kg, in need of a pressure relief mattress that also ensures the mobility of the user.



Brugsanvisning for XXL-Rehab Comfort skummadras

ADVARSEL



Dette produkt må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale.

Bruges produktet til personer, der vejer mere end den maksimale brugervægt, er der risiko for at beskadige produktet.

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert installation, forkert montering eller forkert anvendelse af dette produkt.

Hvis dele er beskadiget eller mangler, kontakt Cobi Rehab med det samme. Brug IKKE erstatnings reservedele.


Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller ulykker, der opstår efter reparationer uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.

 For at sikre korrekt brug af XXL-Rehab Comfort skummadras skal brugsanvisningen læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt mod advarslerne mærket med .

Desuden må madrassen kun betjenes af uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i dens brug, da der ellers er fare for, at brugeren kan komme til skade.

Anvendelse

XXL-Rehab Comfort skummadras er specielt udviklet til forebyggelse af tryksår hos bariatriske brugere, der vejer op til 325 kg. Madrassen kan bruges ved behandling af tryksår op til stadie 2.

 Hvis brugere vejer mere end 325 kg er der risiko for at madrassen vil gå i stykker eller tage skade.

Madrassen passer i plejesenge med 3-4 delt liggeflade.

Beskrivelse

XXL-Rehab Comfort skummadras er opbygget af 2 forskellige lag kvalitetsskum. Basislaget er et tykt bærelag af Heavy Duty PU-skum opskåret i fjedre. Øverst er der 3 cm Visco-elastisk skum, som giver komfort og trykaflastning.

Beskrivelse af betræk

Betrækket er 100% polyuretan og inkontinens betræk i PU.

Derudover er det bielastisk, åndbart, antibakterielt behandlet, samt antiallergisk og brandhæmmende.

Før brug

Placér madrassen på sengen. Vær opmærksom på at betrækket på XXL-Rehab Comfort skummadras er lynet korrekt på madrassen.

Under brug

Madrassen kan vendes, hvilket vil forlænge madrassens levetid.

Undersøg jævnligt madrassen for at sikre optimal effekt.

Vedligeholdelse og rengøring af betræk

- Kan maskinvaskes på maksimum 95° C.
- 134° C steriliseringsbehandling er muligt. (Autoklaving maks. 3 cykler).
- Ingen blegemidler kan anvendes, kun standard desinfektionsmidler må anvendes.
- Må ikke stryges.
- Ingen tør vask.

 Hvis betrækket er beskadiget må bruger ikke anvende madrassen før betrækket er udskiftet.

Specifikationer

Brugervægt max.	325 kg
Længde	200 / 220 cm
Bredde	100 / 120 cm
Højde	18 cm
Madrassens vægt	12 / 13 kg
Anvendelig direkte på sengebund	Ja
Anvendelig til indstillelig sengebund	Ja
Brandhæmmende betræk	Ja
Inkontinens betræk	Ja
Allergivenligt betræk	Ja
Vask- og desinficerbart betræk	Ja
Aftageligt betræk	Ja
Madras	Viscoelastisk PUR skum/ Heavy Duty PU-skum
Betræk	100% polyuretan
ISO - klassifikation	ISO 18 12 18 - 25

Garanti

Garantiperioden for XXL-Rehab Comfort skummadras er 1 år fra købsdato. Fakturaen er "garantibevis".

Produkter, der er blevet anvendt til andre formål end den tilsigtede anvendelse; eller som har været genstand for forsømmelighed, misbrug, forkert opbevaring eller håndtering, fejlbetjening, uautoriserede modifikationer eller skader uden normal slitage, som er afgjort af Cobi Rehab, er ikke omfattet af denne garanti.


Hvis max brugervægt kapaciteten overskrides, vil garantien blive annulleret.

Enhver uautoriseret reparation af produktet / del af produktet, samt manipulation med nogle af komponenterne, vil ugyldiggøre garantien.



XXL-Rehab Comfort skum madras er SANITARY PRODUCT CLASS I (92/42 ECC), reguleret ved kongeligt dekret 414/1996 del VII klassificeret som Sanitært Materiale til forebyggelse af mavesår forårsaget af pres.

PU og den viscoelastiske skum har Øko-Tex Standard 100 KLASSE I certificering, som er en europæisk standard, der garanterer udeladelse af skadelige stoffer i sammensætningen af tekstilprodukter under hele fremstillingsprocessen indtil den endelige levering til kunden.

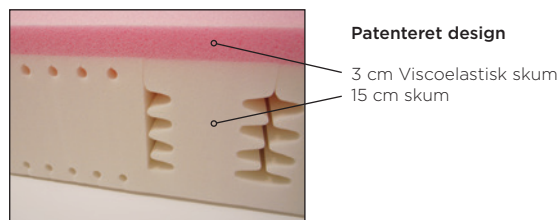

Scan koden og få flere produktinformationer.

PRODUCENT OG FORHANDLER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf.: +45 70 25 25 22
www.cobirehab.com

04/2018/JP

Instructions for XXL-Rehab Comfort foam mattress

CAUTION



This product should not be used without proper instruction from a healthcare professional.

Using the product for individuals weighing more than the maximum weight-bearing capacity may pose a risk for damaging the product.

Cobi Rehab assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.

If components are damaged or missing, contact Cobi Rehab immediately. Do NOT use substitute parts.


Cobi Rehab cannot be held liable for faults or accidents occurring after repairs by service staff without written authorisation from Cobi Rehab.

 **To ensure proper use of the XXL-Rehab Comfort foam mattress, please read these instructions thoroughly before using the product. In doing so, pay particular attention to the warning notes marked with .**

Also remember that in order to prevent the risk of injury to the user, the mattress may be operated only by trained caregivers or aides or by individuals who have been instructed in its proper use.

Use

The XXL-Rehab Comfort foam mattress is designed to provide support and security for a person with a weight of up to 325 kg. The mattress can be used for treatment of pressure relief up to grade 2.

 If users are weighing more than 325 kg there is a risk that the mattress will break or take damage.

Description

The XXL-Rehab Comfort foam mattress is made of two different layers of high quality foam: the base layer is a HD (56Kg/m³) polyurethane foam 15 cm thick. It is manufactured using our patented spring foam technique, based on the distribution of foam springs, which compose the core of the mattress, working independently and distributing the body weight. Recommended by specialists, the system maintains the vertebral spine in the most similar position to an upright position. The system offers a heterogeneous pressure distribution avoiding capillary occlusion. This system avoids mattress deformation and helps to support weights up to 325 kg. The top layer is made of SANITIFOAM[®] viscoelastic foam, it is viscous, very soft to the skin and thermo-sensitive.

This top viscoelastic layer is 3 cm thick and varies the hardness depending on the specific areas that it is placed (pink or white). Pink viscoelastic foam (harder) is placed in the coxal area to distribute the weight in a better way.

Tough and Undistortable: It adapts to the body shape using the body temperature and helping to a uniform pressure distribution.

Anti-allergenic: 100% free of harmful substances. 100% latex free.

Breathable: Open pore manufacturing process allows greater levels of aeration, preventing humidity and the presence of mites and other microbes.

Prevention of pressure ulcers (pu): Body weight distribution minimizes the pressures on the skin allowing unrestricted blood for preventing the appearance of ulcers caused by pressure (pu).

Articulated: This Sanitary Mattress entirely adapts to any kind of Sanitary Bed due to its sectioning design.

Description of cover

The mattress comes covered with an elastic Dhalia fabric cover: 100% polyester coated with PU. The bottom part is made with an antislip beige fabric for preventing the movement of the sanitary mattress on the bed.


In addition, the cover is waterproof, antiallergenic, breathable, antiacaruses and fireproof.

Before use

Place the mattress on the bed. The XXL-Rehab Comfort foam mattress must always be used with the cover zipped correctly.

During use

The mattress can be turned horizontally in the bed to prolong the life of the mattress.

 Inspect the mattress on a regular basis to ensure optimal effect.


Specifications

Maximum weight capacity is	325 kg
Length	200 / 220 cm
Width	100 / 120 cm
Height	18 cm
Weight	12 / 13 kg
Applicable directly on to bed base	Yes
Suitable for adjustable bed base	Yes
Flame-retardant cover	Yes
Incontinence cover	Yes
Antiallergenic cover	Yes
Washable and disinfected cover	Yes
Removable cover	Yes
Mattress	Viscoelastic PUR foam / Heavy Duty PU foam
Cover	100% polyurethane
ISO - classification	ISO 18 12 18 -25

Maintenance and cleaning of cover

- Automatic machine wash to a maximum of 95° C.
- 134° C sterilisation treatment is possible (Autoclaved maximum 3 cycles).
- No bleach, Standard disinfectants may be used.
- Do not iron.
- No dry washing.

⚠ If the cover is damaged do not use the mattress before the cover is replaced.

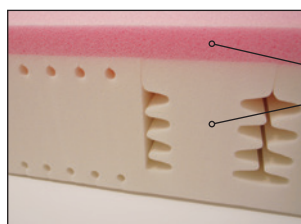

Patented design

3 cm viscoelastic foam
15 cm PU foam



Warranty

The XXL-Rehab Comfort foam mattress is covered by one year warranty from the invoice date for materials and workmanship.

Products which have been used for purposes other than the intended use; or which have been subject to negligence, abuse, improper storage or handling, improper operation, unauthorized modifications or damages beyond normal wear and tear as determined by Cobi Rehab, are not covered by this warranty.

If weight capacity is exceeded, the warranty will be void.

Any unauthorized repairs to product / part, as well as tampering with any components, will void the warranty.



XXL-Rehab Comfort foam mattress is a SANITARY PRODUCT CLASS I (92/42 ECC), regulated by Royal Decree 414/1996 Part VII Classified as Sanitary Material for the Prevention of Ulcers Caused by Pressure.

The PU and the Viscoelastic foam has the OEKO-TEX Standard 100 CLASS I certification which is a European Standard guaranteeing the omission of harmful substances in the composition of textile products during the entire manufacturing process until final delivery to the client.

MANUFACTURER AND DEALER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Denmark
Tel.: +45 70 25 25 22
www.cobirehab.com

04/2018/JP



COBI REHAB[®]

The Positioning Company

COBI REHAB
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Denmark
Tel. +45 7025 2522
www.cobirehab.com