



**COBI REHAB**<sup>®</sup>  
The Positioning Company

BRUGERVEJLEDNING

# Bariatrisk stok

**Stærk og funktionel stok udviklet til den bariatriske bruger.**

Bariatrisk stok er beregnet til brugere op til 270 kg.



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

# Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhed.....	3
2. Symbolforklaring.....	4
3. Generelt .....	5
4. Anvendelse.....	5
5. Indstilling .....	5
6. Langtidsopbevaring .....	6
7. Rengøring og vejledning .....	6
8. Bortskaffelse.....	6
9. Garanti.....	7
10. Specifikationer .....	8
11. Bestilling.....	8

# 1. Sikkerhed

---



## ADVARSEL

Bariatrisk stok må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i brugen af Bariatrisk stok. Ved forkert anvendelse af Bariatrisk stok kan bruger lide skade.

Brugervejledningen skal læses grundigt, før Bariatrisk stok tages i brug. Ret specielt opmærksomheden mod Sikkerhedsvejledninger mærket med

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert anvendelse af Bariatrisk stok.

Kontakt Cobi Rehab med det samme, hvis Bariatrisk stok er beskadiget eller har mangler. Brug aldrig egne erstatningsreservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for skader eller uheldsmæssige situationer, der opstår efter reparationer, der er foretaget uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.






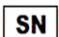





## SIKKERHEDSVEJLEDNINGER







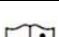


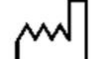

Bariatrisk stok må kun indstilles af uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i brugen af stokken. Forkert indstilling kan skade brugeren.

Bariatrisk stok kan knække eller tage skade, hvis den anvendes af en bruger, der vejer over 270kg.

Bariatrisk stok må ikke benyttes før de to udløserknapper til højdeindstilling er trykket helt på plads. Inderrøret kan løsne sig, hvis ikke udløserknapperne sidder korrekt. Det kan betyde, at inderrøret kan glide ned i inderrøret.

## 2. Symbolforklaring

Følgende symboler findes i brugervejledningen eller på produktets label.	
	Advarsel!
	Overensstemmelseserklæring ifølge Direktivet for medicinsk udstyr, EU 2017/745
	Cobi varenummer
	Serienummer
	Produktionsår
	Fabrikant
	Medicinsk udstyr, klasse 1
	Brugervægt
	Læs manual
CE-Label er placeret på Bariatrisk stok. Eksempel på label kan ses herunder.	

	Cobi Rehab ApS Fuglebækvej 1D DK-2770 Kastrup Tel.: +45 70252522			
	XXL-Rehab Walking cane 0200-000-000			270 KG
	0050808		MADE IN TAIWAN	
	2020			

## 3. Generelt

---

Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om målgruppen for og anvendelsen af Bariatrisk stok. Brugervejledningen indeholder også en specifikationsliste.

Den nyeste version af denne brugervejledning finder du på vores website. Tjek om den version, du sidder med nu, er den nyeste.

Hvis du har brug for en brugervejledning, som er skrevet med en større skriftstørrelse, findes produktarket i PDF-form på [cobirehab.com](https://www.cobirehab.com), som kan skaleres op i skriftstørrelsen.

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på telefon 7025 2522, hvis du ønsker flere oplysninger om Bariatrisk stok.

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående varsel.

Bariatrisk stoks UDI-nummer fremgår af labelen på stokken.

Produktsikkerhedsmeddelelser og tilbagekaldelse af produkter kan ses på hjemmesiden under <https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/vigtig-produktinformation/>

## 4. Anvendelse

---

Bariatrisk stok er en ekstra forstærket stok, specielt udviklet til at yde støtte og sikkerhed under gang for brugere op til 270 kg.

⚠ Bariatrisk stok kan knække eller tage skade, hvis den anvendes af en bruger, der vejer over 270 kg.

Bariatrisk stok bruges på hospitaler, i plejeboliger og i private hjem. Bariatrisk stok kan bruges både indendørs og udendørs.

Konsulter altid en terapeut før Bariatrisk stok anvises til en bruger.

### Kontraindikationer

Der er ingen kontraindikationer forbundet med brugen af Bariatrisk stok.

## 5. Indstilling

---

Bariatrisk stok er udstyret med to udløserknapper på stokkens skaft til højdeindstilling.

Før brug skal højden på Bariatrisk stok justeres ved at trykke på de to udløserknapper.

⚠ Bariatrisk stok må ikke bruges, før de to udløserknapper til højdeindstilling er trykket helt på plads.

Inderrøret kan løsne sig, hvis ikke clipsen sidder korrekt. Det kan betyde, at inderrøret kan glide ned i yderrøret.

## 6. Langtidsopbevaring

---

Bariatrisk stok bør opbevares mørkt og i temperaturer mellem -10° - 50° C.

## 7. Rengøring og vejledning

---

Bariatrisk stok kan rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel.

Kontroller de to udløserknapper regelmæssigt og udskiftes om nødvendigt.

⚠ Manglende kontrol af de to udløserknapper som anvist kan forårsage funktionsfejl.

### Desinficering

Bariatrisk stok kan også desinficeres med fx Wet Wipe 70% eller et klorprodukt 1000-1200 ppm (fx Wet Wipe Chlorine Desinfection).

⚠ Desinficer altid Bariatrisk stok, inden den overgår til ny bruger. Det skal ske for at undgå krydskontamination.

Eventuelle lokale procedurer omkring rengøring og vedligeholdelse skal altid overholdes.

## 8. Bortskaffelse

---

Når Bariatrisk stok ikke længere er i brug, skal den bortskaffes på miljøforsvarlig vis.

Kontakt Cobi Rehab eller kommunen for yderligere information om bortskaffelse.

## 9. Garanti

---

Cobi Rehab garanterer, at Bariatrisk stok er fejlfri, når den leveres. Skulle der mod forventning være mangler eller skade på stokken ved modtagelsen, så kontakt Cobi Rehab med det samme.

Garantiperioden for stokken er et år fra købsdato og dækker produktionsfejl eller defekter ved levering. Fakturaen gælder som garantibevis.

Garantien gælder ikke:

- produkter, hvor serienummer, batchnummer eller lignende er blevet fjernet eller beskadiget væsentligt.

- produkter, hvor der er foretaget reparation af uautoriseret personale.


Garantien omfatter ikke:

- sliddele.

Garantien gælder ikke, hvis Cobi Rehab vurderer, at Bariatrisk stok er blevet håndteret på en uhensigtsmæssig måde.

Ved skade på grund af forkert brug, faktureres både service og anvendte reservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for skader af nogen af art.

 Mangel på vedligeholdelse kan skade Bariatrisk stok, forkorte holdbarheden eller have indvirkning på eller påvirke Bariatrisk stoks ydeevne.

### 9.1 Utilsigtet hændelse

Enhver hændelse, der er indtruffet i forbindelse med brugen af Bariatrisk stok, skal indberettes til Cobi Rehab.

### 9.2 Efter forventet levetid

Efter den forventede levetid er det vigtigt, at der foretages en samlet vurdering af produktet, inden fortsat brug.

Efter den forventede levetid kan Cobi Rehab ikke garantere egnethed og sikkerhed for produktet, da Cobi Rehab ikke har kontrol over, hvordan produktet er brugt og slidt.

Den samlede vurdering af produktet skal udføres af kvalificeret fagpersonel, og som et minimum

skal der tages højde for, hvordan produktet er blevet brugt, produktets tilstand og dets komponenter.

Cobi Rehab kan altid foretage en sådan vurdering.

## 10. Specifikationer

---

Maksimum brugervægt	270 kg
Højdejusterbar	71-93 cm
Vægt	0,9 kg
Refleks	Ja
Materiale	Anodiseret stål
Greb	Vinyl
ISO - klassifikation	ISO 12 03 03 - 05
Produktets forventede levetid	7 år
Risikoklasse	I
UDI-DI	5740000102810
Grundlæggende UDI	5740000100010MV
Overfladetemperaturen på Bariatrisk stok kan stige eller falde, hvis den udsættes for eksterne kulde og varme påvirkninger.	

## 11. Bestilling

---

Model	HMI-nummer	Varenummer
Bariatrisk stok	36492	0200-000-000





**COBI REHAB<sup>®</sup>**  
The Positioning Company

---



**FABRIKANT OG FORHANDLER**

**Cobi Rehab**  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Danmark  
+45 7025 2522  
[cobirehab.com](http://cobirehab.com)