



COBI REHAB®
The Positioning Company

BRUGERVEJLEDNING

Bariatrisk Comfort Kørestolspude

Dansk designet standard kørestolspude til forebyggelse af tryksår hos bariatriske brugere.

Comfort Kørestolspude er beregnet til brugere, der vejer op til 325 kg.



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhed.....	3
2. Symbolforklaring.....	4
3. Generelt	5
4. Anvendelse.....	5
5. I brug.....	5
6. Langtidsopbevaring	6
7. Rengøring og vedligeholdelse	6
8. Bortskaffelse.....	6
9. Garanti.....	7
10. Specifikationer	8
11. Bestilling.....	8

1. Sikkerhed



ADVARSEL

Comfort Kørestolspude må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i brugen af Comfort Kørestolspude. Ved forkert anvendelse kan bruger lide skade.

Brugervejledningen skal læses grundigt, før Comfort Kørestolspude tages i brug. Ret specielt opmærksomheden mod Sikkerhedsvejledninger mærket med

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert anvendelse af Comfort Kørestolspude.

Kontakt Cobi Rehab med det samme, hvis kørestolspuden er beskadiget eller har mangler. Brug aldrig egne erstatningsreservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for skader eller u hensigtsmæssige situationer, der opstår efter reparationer, der er foretaget uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.



SIKKERHEDSVEJLEDNINGER

Comfort Kørestolspude kan tage skade eller forsage personskade, hvis den anvendes af en bruger, der vejer mere end 325 kg.




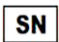


Anbring ikke yderligere lag eller polstring mellem puden og bruger, da dette kan reducere effekten af puden.

En våd eller defekt Comfort Kørestolspude kan mindske effekten af tryksårsforebyggelsen og i værste fald forsage personskade.

Desinficer altid Comfort Kørestolspude, inden den overgår til ny bruger. Det skal ske for at undgå krydskontamination.

Mangel på vedligeholdelse kan skade produktet, forkorte holdbarheden eller have indvirkning på eller påvirke Comfort Kørestolspudens ydeevne.

2. Symbolforklaring

Følgende symboler findes i brugervejledningen eller på produktets label.	
	Advarsel!
	Overensstemmelseserklæring ifølge Direktivet for medicinsk udstyr, EU 2017/745
	Cobi varenummer
	Serienummer
	Produktionsår
	Fabrikant
CE-Label er placeret på pakningen til puden. Eksempel på label kan ses herunder.	



3. Generelt

Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om målgruppen for og anvendelsen af Comfort Kørestolspude. Brugervejledningen indeholder også en specifikationsliste.

Den nyeste version af denne brugervejledning finder du på vores website. Tjek om den version, du sidder med nu, er den nyeste.

Hvis du har brug for en brugervejledning, som er skrevet med en større skriftstørrelse, findes vejledningen i PDF-form på [cobirehab.com](https://www.cobirehab.com), som kan skaleres op i skriftstørrelsen.

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på telefon 7025 2522, hvis du ønsker flere oplysninger om Comfort Kørestolspude.

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående varsel.

Produktsikkerhedsmeddelelser og tilbagekaldelse af produkter kan ses på hjemmesiden under <https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/vigtig-produktinformation/>

4. Anvendelse

Comfort Kørestolspude er en standard kørestolspude til forebyggelse af tryksår hos bariatriske brugere.

Comfort Kørestolspude består af et tre cm viskoelastisk skumlag øverst. Nederst er der et Heavy Duty PUR-skumlag, opskåret i fjedre.

Affjedringssystemet er patenteret og sikrer, at trykket fordeles til en større overflade, hvilket øger trykaflastningen.

Det medfølgende inkontinensbetræk er lavet af Dartex materiale. Inkontinensbetrækket er åndbart, antibakterielt behandlet og brandhæmmende.

⚠ Comfort Kørestolspude kan tage skade eller forårsage personskade, hvis den anvendes af en bruger over 325 kg.

Comfort Kørestolspude bruges i kørestole på hospitaler, i plejeboliger og private hjem.

Konsulter altid en terapeut før, der anviser en Comfort Kørestolspude til en bruger.

Kontraindikationer

Der er ingen kontraindikationer forbundet med brugen af produktet.

5. I brug

Før brug

Placér Comfort Kørestolspude i kørestol eller i stol, så lynlåsen vender nedad. Tjek, at betrækket på Comfort Kørestolspude er lynet korrekt.

⚠ Anbring ikke yderligere lag eller polstring mellem puden og bruger, da dette kan reducere effekten af puden.

Under brug

Undersøg jævnligt kørestolspuden for at sikre, at pude og betræk vender korrekt, og at puden ikke er våd eller defekt.

⚠ En våd eller defekt Comfort Kørestolspude kan mindske effekten af tryksårsforebyggelsen og i værste fald forårsage personskade.

6. Langtidsopbevaring

Comfort Kørestolspude bør opbevares mørkt og i temperaturer mellem -10° - 50° C.

7. Rengøring og vedligeholdelse

Comfort Kørestolspude kan ikke vaskes i vaskemaskine.

Inkontinensbetrækket kan rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel. Betrækket kan også maskinvaskes på 95° C og tørretumbles.

Desinfektion

Comfort Kørestolspude kan også desinficeres med fx Wet Wipe 70% eller et klorprodukt 1000-1200 ppm (fx Wet Wipe Chlorine Desinfection).

⚠ Desinficer altid Comfort Kørestolspude, inden den overgår til ny bruger. Det skal ske for at undgå krydskontamination.

Lokale procedurer omkring rengøring og vedligeholdelse skal altid overholdes.

8. Bortskaffelse

Når Comfort Kørestolspude ikke længere er i brug, skal den bortskaffes på miljøforsvarlig vis.

Kontakt Cobi Rehab eller kommunen for yderligere information om bortskaffelse.

9. Garanti

Cobi Rehab garanterer, at Comfort Kørestolspude er fejlfri, når den leveres. Skulle der mod forventning være mangler eller skade på kørestolspuden ved modtagelsen, så kontakt Cobi Rehab med det samme.

Garantiperioden for Comfort Kørestolspude er et år fra købsdato og dækker produktionsfejl eller defekter ved levering. Fakturaen gælder som garantibevis.

Garantien gælder ikke:

- produkter, hvor serienummer, batchnummer eller lignende er blevet fjernet eller beskadiget væsentligt.
- produkter, hvor der er foretaget reparation af uautoriseret personale.

9.1 Utilsigtet hændelse

Enhver hændelse, der er indtruffet i forbindelse med brugen af Comfort Kørestolspude, skal indberettes til Cobi Rehab.

9.2 Efter forventet levetid

Efter den forventede levetid er det vigtigt, at der foretages en samlet vurdering af produktet, inden fortsat brug.

Efter den forventede levetid kan Cobi Rehab ikke garantere egnethed og sikkerhed for produktet, da Cobi Rehab ikke har kontrol over, hvordan produktet er brugt og slidt.

Den samlede vurdering af produktet skal udføres af kvalificeret fagpersonel, og som et minimum

Garantien omfatter ikke:
- sliddele.

Garantien gælder ikke, hvis Cobi Rehab vurderer, at Comfort Kørestolspude er blevet håndteret på en u hensigtsmæssig måde.

Ved skade på grund af forkert brug, faktureres både service og anvendte reservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for skader af nogen af art.

⚠ Mangel på vedligeholdelse kan skade produktet, forkorte holdbarheden eller have indvirkning på eller påvirke Comfort Kørestolspudens ydeevne.

skal der tages højde for, hvordan produktet er blevet brugt, produktets tilstand og dets komponenter.

Cobi Rehab kan altid foretage en sådan vurdering.

10. Specifikationer

Maksimum brugervægt	325 kg
Vægt	2 kg
Sædebredde	550/610/660/720/820 mm
Sædedybde	450 mm
Sædehøjde	120 mm
Pudebase	HD PUR-skum og viskoelastisk PUR-skum
Inkontinensbetræk	Dartex
ISO - klassifikation	18 10 06 01
Produktets forventede levetid	3 år
Risikoklasse	I
Grundlæggende UDI	5740000100011MX
Overfladetemperaturen på Comfort Kørestolspude kan stige eller falde, hvis puden udsættes for eksterne kulde og varme påvirkninger.	

11. Bestilling

Model	Bredde cm	Dybde x højde cm	HMI-nummer	Varenummer
Comfort Kørestolspude med inkon. betræk	55	45 x 12	47700	0230-055-045
Comfort Kørestolspude med inkon. betræk	61	45 x 12	47699	0230-061-045
Comfort Kørestolspude med inkon. betræk	66	45 x 12	47697	0230-066-045
Comfort Kørestolspude med inkon. betræk	72	45 x 12	45332	0230-072-045
Comfort Kørestolspude med inkon. betræk	82	45 x 12	47701	0230-082-045
Inkontinensbetræk	55			0230-055-001
Inkontinensbetræk	61			0230-061-001
Inkontinensbetræk	66			0230-066-001
Inkontinensbetræk	72			0230-072-001
Inkontinensbetræk	82			0230-082-001



COBI REHAB[®]

The Positioning Company



FABRIKANT OG FORHANDLER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
+45 7025 2522
cobirehab.com