

XXL-Rehab Bariatri

Senge og madrasser

*Positioneringsløsninger til svært overvægtige
alle døgnets timer*



COBI REHAB[®]
The Positioning Company



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

XXL-Rehab Plejeseng

Udviklet specielt til bariatriske brugere op til 300 kg

XXL-Rehab Plejeseng er udviklet til den bariatriske bruger, som har brug for en ekstra bred seng. Den fås i bredden 100 cm eller 120 cm. XXL-Rehab Plejeseng er en moderne plejeseng med et smart design, som passer både til plejecentre og private hjem. Sengen tilgodeser både brugerens og plejerens behov.

Robust og stabil

Er meget stabil og derfor særdeles egnet til dem, der selv klarer forflytninger. Et stabilt stel med 8 låsbare hjul sikrer, at sengen hverken vipper eller ryster faretruende, hvis brugeren sætter sig tungt. Sengen er ekstra forstærket og har en helt speciel robust saksekonstruktion. Den leveres med sengegavle og sengehest i træfinér.

EI-betjening

XXL-Rehab Plejeseng har en 4-delt liggeflade med eleverbar hoved- og bendel samt højdejustering, som betjenes med fjernbetjening. På fjernbetjeningen er der illustrativt vist, hvad hver knap betjener. Fjernbetjeningen kan placeres i begge sider af sengen.

Gode arbejdsstillinger

For plejepersonalet er plejesengen tillige praktisk anvendelig. Den højdejusterbare sengeflade sikrer gode arbejdsstillinger for plejepersonalet og at sengen har den rette højde, når brugeren skal rejse eller sætte sig.



- Op til 300 kg
- 2 bredder; 100 og 120 cm
- 2 længder; 200 og 220 cm
- 4-delt liggeflade
- Pænt design - passer til private hjem

MAX 300 kg

XXL-Rehab Plejeseng Specifikationer

| XXL-Rehab Plejeseng | |
|---|-------------------------|
| Brugervægt max. | 200 / 300 kg |
| Total længde | 210 / 230 cm |
| Total bredde | 110 / 130 cm |
| Madras mål længde | 200 / 220 cm |
| Madras mål bredde | 100 / 120 cm |
| Liggeflade højde | 40-80 cm |
| Friafstand over gulv | 11 cm |
| Vægt | 200 kg |
| Højdejusterbar | Ja |
| Elektrisk indstilling af ryglæn, bendel/lårdele og liggeflade højde | Ja |
| Hovedgærde op/ned funktion | Ja |
| Fodende op/ned funktion | Ja |
| Separat indstilling af ryglæn | Ja |
| Sammenkoblet indstilling af liggeflade | Ja |
| Aftagelig galge | Ja |
| Høje tremmesider/sengehest | Ja |
| Stel | Pulverlakeret stål |
| Sengeramme | Træfinér |
| Hjul | 8 stk., 100 mm, låsbare |
| IP - klassifikation | IP66 |
| ISO - klassifikation | ISO 18 12 10 - 30 |

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere op til 300 kg, som har brug for en ekstra bred seng.
- Brugere, der har brug for ekstra plads, for selv at kunne vende sig i sengen.



| Model | Bredde cm | Længde cm | Brugervægt max. kg | Varenummer | HMI |
|---------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------|--------|
| XXL-Rehab Plejeseng | 100 | 200 | 200 | 2312-100-200 | 40937 |
| XXL-Rehab Plejeseng | 100 | 220 | 200 | 2312-100-220 | 100208 |
| XXL-Rehab Plejeseng | 120 | 200 | 300 | 2312-120-200 | 42269 |
| XXL-Rehab Plejeseng | 120 | 220 | 300 | 2312-120-220 | 70765 |

| Tilbehør | | |
|---|--------------|--|
| Sengegalge til XXL-Rehab Plejeseng 100x200 cm | 2312-999-010 | |
| Sengegalge til XXL-Rehab Plejeseng 120x200 cm | 2312-999-012 | |



XXL-Rehab 500 Hospitalsseng

Med indstillelig bredde og længde.

Stærk og funktionel hospitalsseng specielt udviklet til bariatriske brugere op til 450 kg

XXL-Rehab 500 Hospitalsseng er velegnet til bariatriske brugere, der vejer op til 450 kg, eller til brugeren der har brug for en ekstra bred seng.

Indstillelig i bredde og længde

XXL-Rehab 500 Hospitalsseng er meget nem at genbruge, da sengen uden brug af værktøj kan justeres både i bredden (90, 100 eller 120 cm) og i længden (200 eller 220 cm).

Er meget anvendelig på hospitaler, idet den gøres midlertidigt smallere for eksempel under transport af bruger fra en afdeling til en anden. Dette kan være nødvendigt for at komme ind i en elevator eller gennem døre.

Ligeledes kan XXL-Rehab 500 Hospitalsseng med fordel anvendes i private hjem og på genoptræningscentre.

Robust konstruktion

Det stabile stel og den robuste konstruktion sikrer, at sengen yder stor stabilitet for brugeren, også i forbindelse med forflytning.

Sengen er udstyret med

- Centralbremse.
- Retningsstyr på hjulene.
- 4-delt liggeflade.
- Højdejusterbar.

2 el-betjener

XXL-Rehab 500 Hospitalsseng har en el-betjening, som bruger har mulighed for at anvende og en anden el-betjening monteret i sengens fodende til brug for plejepersonalet. Her er der blandt andet mulighed for at låse funktioner for brugeren, for eksempel Trendelenburg og Anti-Trendelenburg. Kan også låses i andre el-funktioner, hvis det ønskes, at bruger ikke skal have adgang til disse funktioner.

XXL-Rehab 500 Hospitalsseng tilgodeser i høj grad både brugerens behov og plejepersonalets arbejdsmiljø.

Sengen har et let og elegant design med afrundede hjørner, hvilket gør den meget rengøringsvenlig.

- Indstillelig i bredde og længde
- Lette sengeheste, der er aftagelige, uden brug af værktøj
- 2 el-betjener
- Mulighed for at låse visse el-funktioner
- Velegnet til genbrug på grund af den justerbare bredde og længde

MAX 450 kg

Kan breddeindstilles i begge sider.



XXL-Rehab 500 Hospitalsseng

Specifikationer

| XXL-Rehab 500 Hospitalsseng | |
|--|--------------------------|
| Brugervægt max. | 450 kg + 50 kg udstyr |
| Total længde | 231-251 cm |
| Total bredde | 100-128 cm |
| Madras mål længde | 200 / 220 cm |
| Madras mål bredde | 90 / 100 / 120 cm |
| Længde manuel justerbar | 200 / 220 cm |
| Bredde manuel justerbar | 90 / 100 / 120 cm |
| Liggeflade højde | 39-82 cm |
| Friaftand over gulv | 15 cm |
| Vægt | 175 kg |
| Højdejusterbar | Ja |
| Separat betjening for plejepersonale. Blandt andet Trendelenburg og Anti-Trendelenburg indstilling | Ja |
| Elektrisk indstilling af ryglæn, bendel, lårdel, liggeflade højde | Ja |
| Hovedgærde op/ned funktion | Ja |
| Fodende op/ned funktion | |
| Sengehæste aftagelige uden brug af værktøj | Ja |
| Retningsstyr på hjul | Ja |
| Centralbremse | Ja |
| Magnetlås på brugerhåndbetjening | Ja |
| Indbygget sengeforlænger | Ja |
| Lås af enkelte el-funktioner, fra plejepersonalets betjeningspanel | Ja |
| Separat indstilling af ryglæn | Ja |
| Sammenkoblet indstilling af liggeflade | Ja |
| Aftagelig galge | Ja |
| Aftagelig fodgavl/hovedgavl | Ja |
| Høje tremmesider/sengehest | Ja |
| Stel | Pulverlakeret stål |
| Hjul | 145 mm |
| IP - klassifikation | IP66 |
| ISO - klassifikation | ISO 18 12 10 - 30 |

| Model | Varenummer | HMI |
|-----------------------------|--------------|-------|
| XXL-Rehab 500 Hospitalsseng | 2314-120-220 | 63355 |

| Tilbehør | | |
|------------|--------------|--|
| Sengehest | 2314-999-008 | |
| Sengegalge | 2314-999-010 | |
| Dropstativ | 2314-999-012 | |

Anvendes med fordel til...


- Bariatriske brugere op til 450 kg.
- Bariatriske brugere på hospitaler.
- Bariatriske brugere eller andre brugere, der har brug for en ekstra bred seng.
- På genoptræningscentre.
- I hjemmet.



Betjeningspanel for plejepersonalet



Håndbetjening

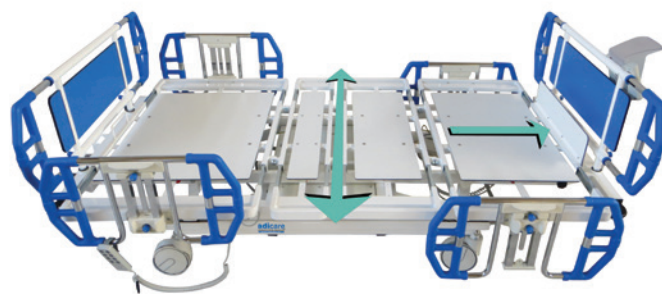

Sengen må maksimalt belastes med 500 kg inklusiv bruger og udstyr



XXL-Rehab Vekseltryksmadras

Vekseltryks helmadras til bariatriske brugere op til 270 kg

XXL-Rehab vekseltryks helmadras er specielt udviklet til bariatriske brugere, der har tryksår eller som er i høj risiko for at udvikle tryksår.

XXL-Rehab vekseltryks helmadras kan med fordel anvendes på hospitaler, i hjemmet, i hjemmeplejen, i plejeboliger og på institutioner. Er særligt velegnet til den bariatriske bruger, som har brug for maksimal trykaflastning på grund af tryksår eller som er i høj risiko for at udvikle tryksår. Madrassen kan bruges til behandling af tryksår op til stadie 4.

Trykaflastning af den bariatriske bruger er ekstra vigtig, fordi de ofte har svært ved at flytte og vende sig selv i sengen. Mange kan på grund af fysiske begrænsninger kun tåle at ligge i én bestemt stilling.

Samtidig har den bariatriske bruger ofte problemer med blodgennemstrømning til det perifere væv, svedtendens og mange andre følgesygdomme såsom diabetes. Derfor er det meget vigtigt, at den bariatriske bruger får så god en trykaflastning i den liggende stilling som muligt. Dette kan XXL-Rehab vekseltryksmadrassen være med til at sikre.

Madras

- Består af 20 luftceller (22 cm høje), hvilket er med til at sikre den dybe lejrning.
- Består af en 5 cm luftfyldt undermadras, som sikrer, at bruger ved strømsvigt eller lignende ikke kommer i kontakt med sengens bund.

Betræk

- Inkontinens betræk i PU.
- Bielastisk, åndbart, antibakterielt behandlet, antiallergisk og brandhæmmende.

Pumpen

- Er forsynet med tydeligt og let forståeligt display.
- Kan indstilles efter vægt.
- Har Autofirm funktion som selv slår selv fra efter 15 minutter.
- Kan indstilles til cyklus tid på 10, 15, 20 eller 25 minutter.
- Har audiovisuel alarm ved fejl som strømsvigt eller lufttab.

- Vekseltryks helmadras
- Til bariatriske brugere op til 270 kg
- Tryksår stadie op til stadie 4
- Fås i 2 længder og bredder

MAX 270 kg



Pumpe med tydeligt let forståeligt display.

XXL-Rehab vekseltryksmadras

Specifikationer

| XXL-Rehab Vekseltryksmadras | |
|---------------------------------------|--|
| Brugervægt max. | 270 kg |
| Længde | 200 / 220 cm |
| Bredde | 100 / 120 cm |
| Højde | 27 cm |
| Madrassens vægt | 14 / 18 kg |
| Pumpens vægt | 3,8 kg |
| Pumpens mål | 35 x 13 x 24 cm |
| Sektionsopdelt madras | Ja |
| Alarm ved lufttab | Ja |
| Alarm ved strømsvigt | Ja |
| Lyntømningsfunktion | Ja |
| Statisk funktion | Ja |
| Anvendelig direkte på sengebund | Ja |
| Anvendelig til indstillelig sengebund | Ja |
| Brandhæmmende betræk | Ja |
| Inkontinens betræk | Ja |
| Allergivenligt betræk | Ja |
| Vask- og desinficerbart betræk | Ja |
| Tryksårsforebyggende stadie | Op til stadie 4 |
| Betræk | PU |
| Celler | Nylon / PU |
| Medicinsk udstyr | Klasse I IXPO AP/APG NO TYPE BF |
| Tilsluttet del | Madras |
| Strøm tilslutning | AC 120 V / 60 Hz, 10 W 1A |
| Tryk interval | 10 - 75 mmHg |
| Cyklus tid | 10, 15, 20, 25 min valgbar |
| Sikkerhedsstandarder | UL, c-UL, CE |
| ISO - klassifikation | ISO 18 12 18 - 28 |

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere, der på grund af deres overvægt eller anden sygdom skal have hjælp til stillingsskift.
- Bariatriske brugere, der har udviklet tryksår, eller som er i høj risiko for at gøre det.



Nem CPR funktion.
Madrassen kræver høje sengeheste.

| Model | Længde cm | Bredde cm | Højde cm | Varenummer | HMI |
|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------|
| XXL-Rehab vekseltryksmadras med pumpe | 200 | 100 | 27 | 0244-100-200 | 64339 |
| XXL-Rehab vekseltryksmadras med pumpe | 200 | 120 | 27 | 0244-120-200 | 39533 |
| XXL-Rehab vekseltryksmadras med pumpe | 220 | 100 | 27 | 0244-100-220 | 109588 |
| XXL-Rehab vekseltryksmadras med pumpe | 220 | 120 | 27 | 0244-120-220 | 109591 |

| Tilbehør | | | | | |
|--|-----|-----|----|--------------|--|
| Betræk standard til XXL-Rehab vekseltryksmadras | 200 | 100 | 27 | 0244-100-230 | |
| Betræk standard til XXL-Rehab vekseltryksmadras | 200 | 120 | 27 | 0244-120-230 | |
| Betræk standard til XXL-Rehab vekseltryksmadras | 220 | 100 | 27 | 0244-100-232 | |
| Betræk standard til XXL-Rehab vekseltryksmadras | 220 | 120 | 27 | 0244-120-234 | |



XXL-Rehab Comfort skummadras

Skummadras til forebyggelse af tryksår hos bariatriske brugere

XXL-Rehab Comfort skummadras er specielt udviklet til forebyggelse af tryksår hos bariatriske brugere, der har en ekstra bred plejeseng.

XXL-Rehab Comfort skummadras kan med fordel anvendes til den bariatriske bruger, som har brug for en madras, der giver maksimal komfort og stor trykaflastning uden at nedsætte brugerens funktionsniveau. Madrassen kan bruges ved behandling af tryksår op til stadie 2.

Madrasen

- Er 18 cm høj og opbygget med et tykt bærelag af Heavy Duty PU-skum opskåret i fjedre, hvilket giver bedre trykaflastning end en almindelig skummadras. Øverst er der 3 cm Viscoelastisk skum, som giver god komfort og trykaflastning.

Betræk

- Inkontinens betræk i PU.
- Bielastisk, åndbart, antibakterielt behandlet, antiallergisk og brandhæmmende.

MAX 325 kg

- Passer perfekt i plejesenge med 3-4 delt liggeflade
- Trykaflastende madras som samtidig sikrer, at brugers mobilitet bibeholdes



XXL-Rehab Comfort skummadras

Specifikationer

| XXL-Rehab Comfort skummadras | |
|---------------------------------------|--|
| Brugervægt max. | 325 kg |
| Længde | 200 / 220 cm |
| Bredde | 100 / 120 cm |
| Højde | 18 cm |
| Madrassens vægt | 12 / 13 kg |
| Anvendelig direkte på sengebund | Ja |
| Anvendelig til indstillelig sengebund | Ja |
| Brandhæmmende betræk | Ja |
| Inkontinens betræk | Ja |
| Allergivenligt betræk | Ja |
| Vask- og desinficerbart betræk | Ja |
| Aftageligt betræk | Ja |
| Madras | Viscoelastisk PUR skum/ Heavy Duty PU-skum |
| Betræk | 100% polyuretan |
| ISO - klassifikation | ISO 18 12 18 - 25 |

Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere som vejer op til 325 kg, og hvor man ønsker at bibeholde deres mobilitet, samtidig med de får en trykaflastende liggeflade.

| Model | Længde cm | Bredde cm | Højde cm | Varenummer | HMI |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| XXI-Rehab Comfort Skummadras | 200 | 100 | 18 | 0240-100-200 | 47696 |
| XXI-Rehab Comfort Skummadras lang | 220 | 100 | 18 | 0240-100-220 | 70143 |
| XXI-Rehab Comfort Skummadras | 200 | 120 | 18 | 0240-120-200 | 36579 |
| XXI-Rehab Comfort Skummadras lang | 220 | 120 | 18 | 0240-100-220 | 70144 |

Indholdsfortegnelse

- 2-3 XXL-Rehab Plejeseng
- 4-5 XXL-Rehab 500 Hospitalsseng
- 6-7 XXL-Rehab Vekseltryksmadras
- 8-9 XXL-Rehab Comfort skummadras



COBI REHAB[®]

The Positioning Company

COBI REHAB
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf. +45 7025 2522
www.cobirehab.com