

# Bariatri

## Senge og madrasser

*Positioneringsløsninger til svært overvægtige  
alle døgnets timer*



**COBI REHAB**<sup>®</sup>  
The Positioning Company



**COBI REHAB**<sup>®</sup>  
The Positioning Company

# XXL-Rehab Plejeseng

Udviklet specielt til bariatriske brugere op til 300 kg

XXL-Rehab Plejeseng er udviklet til den bariatriske bruger, som har brug for en ekstra bred seng. Den fås i bredden 100 cm eller 120 cm. XXL-Rehab Plejeseng er en moderne plejeseng med et smart design, som passer både til plejecentre og private hjem. Sengen tilgodeser både brugerens og plejerens behov.

## Robust og stabil

Er meget stabil og derfor særdeles egnet til dem, der selv klarer forflytninger. Et stabilt stel med 8 låsbare hjul sikrer, at sengen hverken vipper eller ryster faretruende, hvis brugeren sætter sig tungt. Sengen er ekstra forstærket og har en helt speciel robust saksekonstruktion. Den leveres med sengegavle og sengehest i træfinér.

## EI-betjening

XXL-Rehab Plejeseng har en 4-delt liggeflade med eleverbar hoved- og bendel samt højdejustering, som betjenes med fjernbetjening. På fjernbetjeningen er der illustrativt vist, hvad hver knap betjener. Fjernbetjeningen kan placeres i begge sider af sengen.

## Gode arbejdsstillinger

For plejepersonalet er plejesengen tillige praktisk anvendelig. Den højdejusterbare sengeflade sikrer gode arbejdsstillinger for plejepersonalet og at sengen har den rette højde, når brugeren skal rejse eller sætte sig.



- Op til 300 kg
- 2 bredder; 100 og 120 cm
- 2 længder; 200 og 220 cm
- 4-delt liggeflade
- Pænt design - passer til private hjem

MAX 300 kg

## XXL-Rehab Plejeseng Specifikationer

XXL-Rehab Plejeseng	
Brugervægt max.	200 / 300 kg
Total længde	210 / 230 cm
Total bredde	110 / 130 cm
Madras mål længde	200 / 220 cm
Madras mål bredde	100 / 120 cm
Liggeflade højde	40-80 cm
Friafstand over gulv	11 cm
Vægt	200 kg
Højdejusterbar	Ja
Elektrisk indstilling af ryglæn, bendel/lårdele og liggeflade højde	Ja
Hovedgærde op/ned funktion	Ja
Fodende op/ned funktion	Ja
Separat indstilling af ryglæn	Ja
Sammenkoblet indstilling af liggeflade	Ja
Aftagelig galge	Ja
Høje tremmesider/sengehest	Ja
Stel	Pulverlakeret stål
Sengeramme	Træfinér
Hjul	8 stk., 100 mm, låsbare
IP - klassifikation	IP66
ISO - klassifikation	ISO 18 12 10 - 30

### Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere op til 300 kg, som har brug for en ekstra bred seng.
- Brugere, der har brug for ekstra plads, for selv at kunne vende sig i sengen.



Model	Bredde cm	Længde cm	Brugervægt max. kg	Varenummer	HMI
XXL-Rehab Plejeseng	100	200	200	2312-100-200	40937
XXL-Rehab Plejeseng	100	220	200	2312-100-220	100208
XXL-Rehab Plejeseng	120	200	300	2312-120-200	42269
XXL-Rehab Plejeseng	120	220	300	2312-120-220	70765

Tilbehør		
Sengegalge til XXL-Rehab Plejeseng 100x200 cm	2312-999-010	
Sengegalge til XXL-Rehab Plejeseng 120x200 cm	2312-999-012	



# XXL-Rehab 500 Hospitalsseng

Med indstillelig bredde og længde.

Stærk og funktionel hospitalsseng specielt udviklet til bariatriske brugere op til 450 kg

XXL-Rehab 500 Hospitalsseng er velegnet til bariatriske brugere, der vejer op til 450 kg, eller til brugeren der har brug for en ekstra bred seng.

## Indstillelig i bredde og længde

XXL-Rehab 500 Hospitalsseng er meget nem at genbruge, da sengen uden brug af værktøj kan justeres både i bredden (90, 100 eller 120 cm) og i længden (200 eller 220 cm).

Er meget anvendelig på hospitaler, idet den gøres midlertidigt smallere for eksempel under transport af bruger fra en afdeling til en anden. Dette kan være nødvendigt for at komme ind i en elevator eller gennem døre.

Ligeledes kan XXL-Rehab 500 Hospitalsseng med fordel anvendes i private hjem og på genoptræningscentre.

## Robust konstruktion

Det stabile stel og den robuste konstruktion sikrer, at sengen yder stor stabilitet for brugeren, også i forbindelse med forflytning.

## Sengen er udstyret med

- Centralbremse.
- Retningsstyr på hjulene.
- 4-delt liggeflade.
- Højdejusterbar.

## 2 el-betjening

XXL-Rehab 500 Hospitalsseng har en el-betjening, som bruger har mulighed for at anvende og en anden el-betjening monteret i sengens fodende til brug for plejepersonalet. Her er der blandt andet mulighed for at låse funktioner for brugeren, for eksempel Trendelenburg og Anti-Trendelenburg. Kan også låses i andre el-funktioner, hvis det ønskes, at bruger ikke skal have adgang til disse funktioner.

XXL-Rehab 500 Hospitalsseng tilgodeser i høj grad både brugerens behov og plejepersonalets arbejdsmiljø.

Sengen har et let og elegant design med afrundede hjørner, hvilket gør den meget rengøringsvenlig.

- Indstillelig i bredde og længde
- Lette sengeheste, der er aftagelige, uden brug af værktøj
- 2 el-betjening
- Mulighed for at låse visse el-funktioner
- Velegnet til genbrug på grund af den justerbare bredde og længde

**MAX 450 kg**

Kan breddeindstilles i begge sider.





# XXL-Rehab 500 Hospitalsseng

## Specifikationer

XXL-Rehab 500 Hospitalsseng	
Brugervægt max.	450 kg + 50 kg udstyr
Total længde	231-251 cm
Total bredde	100-128 cm
Madras mål længde	200 / 220 cm
Madras mål bredde	90 / 100 / 120 cm
Længde manuel justerbar	200 / 220 cm
Bredde manuel justerbar	90 / 100 / 120 cm
Liggeflade højde	39-82 cm
Friaftand over gulv	15 cm
Vægt	175 kg
Højdejusterbar	Ja
Separat betjening for plejepersonale. Blandt andet Trendelenburg og Anti-Trendelenburg indstilling	Ja
Elektrisk indstilling af ryglæn, bendel, lårdel, liggeflade højde	Ja
Hovedgærde op/ned funktion	Ja
Fodende op/ned funktion	
Sengehæste aftagelige uden brug af værktøj	Ja
Retningsstyr på hjul	Ja
Centralbremse	Ja
Magnetlås på brugerhåndbetjening	Ja
Indbygget sengeforlænger	Ja
Lås af enkelte el-funktioner, fra plejepersonalets betjeningspanel	Ja
Separat indstilling af ryglæn	Ja
Sammenkoblet indstilling af liggeflade	Ja
Aftagelig galge	Ja
Aftagelig fodgavl/hovedgavl	Ja
Høje tremmesider/sengehest	Ja
Stel	Pulverlakeret stål
Hjul	145 mm
IP - klassifikation	IP66
ISO - klassifikation	ISO 18 12 10 - 30

Model	Varenummer	HMI
XXL-Rehab 500 Hospitalsseng	2314-120-220	63355

Tilbehør		
Sengehest	2314-999-008	
Sengegalge	2314-999-010	
Dropstativ	2314-999-012	

### Anvendes med fordel til...


- Bariatriske brugere op til 450 kg.
- Bariatriske brugere på hospitaler.
- Bariatriske brugere eller andre brugere, der har brug for en ekstra bred seng.
- På genoptræningscentre.
- I hjemmet.



Betjeningspanel for plejepersonalet



Håndbetjening

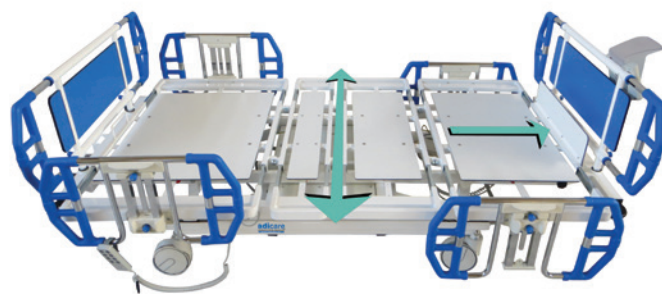

Sengen må maksimalt belastes med 500 kg inklusiv bruger og udstyr



# XXL-Rehab Vekseltryksmadras

Vekseltryks helmadras til bariatriske brugere op til 270 kg

XXL-Rehab vekseltryks helmadras er specielt udviklet til bariatriske brugere, der har tryksår eller som er i høj risiko for at udvikle tryksår.

XXL-Rehab vekseltryks helmadras kan med fordel anvendes på hospitaler, i hjemmet, i hjemmeplejen, i plejeboliger og på institutioner. Er særligt velegnet til den bariatriske bruger, som har brug for maksimal trykaflastning på grund af tryksår eller som er i høj risiko for at udvikle tryksår. Madrassen kan bruges til behandling af tryksår op til stadie 4.

Trykaflastning af den bariatriske bruger er ekstra vigtig, fordi de ofte har svært ved at flytte og vende sig selv i sengen. Mange kan på grund af fysiske begrænsninger kun tåle at ligge i én bestemt stilling.

Samtidig har den bariatriske bruger ofte problemer med blodgennemstrømning til det perifere væv, svedtendens og mange andre følgesygdomme såsom diabetes. Derfor er det meget vigtigt, at den bariatriske bruger får så god en trykaflastning i den liggende stilling som muligt. Dette kan XXL-Rehab vekseltryksmadrassen være med til at sikre.

## Madras

- Består af 20 luftceller (22 cm høje), hvilket er med til at sikre den dybe lejrning.
- Består af en 5 cm luftfyldt undermadras, som sikrer, at bruger ved strømsvigt eller lignende ikke kommer i kontakt med sengens bund.

## Betræk

- Inkontinens betræk i PU.
- Bielastisk, åndbart, antibakterielt behandlet, antiallergisk og brandhæmmende.

## Pumpen

- Er forsynet med tydeligt og let forståeligt display.
- Kan indstilles efter vægt.
- Har Autofirm funktion som selv slår selv fra efter 15 minutter.
- Kan indstilles til cyklus tid på 10, 15, 20 eller 25 minutter.
- Har audiovisuel alarm ved fejl som strømsvigt eller lufttab.

- Vekseltryks helmadras
- Til bariatriske brugere op til 270 kg
- Tryksår stadie op til stadie 4

MAX 270 kg



Pumpe med tydeligt let forståeligt display.

## XXL-Rehab vekseltryksmadras

### Specifikationer

XXL-Rehab Vekseltryksmadras	
Brugervægt max.	270 kg
Længde	200 cm
Bredde	100 / 120 cm
Højde	27 cm
Madrassens vægt	14 / 18 kg
Pumpens vægt	3,8 kg
Pumpens mål	35 x 13 x 24 cm
Sektionsopdelt madras	Ja
Alarm ved lufttab	Ja
Alarm ved strømsvigt	Ja
Lyntømningsfunktion	Ja
Statisk funktion	Ja
Anvendelig direkte på sengebund	Ja
Anvendelig til indstillelig sengebund	Ja
Brandhæmmende betræk	Ja
Inkontinens betræk	Ja
Allergivenligt betræk	Ja
Vask- og desinficerbart betræk	Ja
Tryksårsforebyggende stadie	Op til stadie 4
Betræk	PU
Celler	Nylon / PU
Medicinsk udstyr	Klasse I IXPO AP/APG NO TYPE BF
Tilsluttet del	Madras
Strøm tilslutning	AC 120 V / 60 Hz, 10 W 1A
Tryk interval	10 - 75 mmHg
Cyklus tid	10, 15, 20, 25 min valgbar
Sikkerhedsstandarder	UL, c-UL, CE
ISO - klassifikation	ISO 18 12 18 - 28

#### Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere, der på grund af deres overvægt eller anden sygdom skal have hjælp til stillingsskift.
- Bariatriske brugere, der har udviklet tryksår, eller som er i høj risiko for at gøre det.



Nem CPR funktion.  
Madrassen kræver høje sengeheste.

Model	Længde cm	Bredde cm	Højde cm	Varenummer	HMI
XXL-Rehab vekseltryksmadras med pumpe	200	100	27	0244-100-200	64339
XXL-Rehab vekseltryksmadras med pumpe	200	120	27	0244-120-200	39533

Tilbehør					
Betræk standard til XXL-Rehab vekseltryksmadras	200	100	27	0244-100-230	
Betræk standard til XXL-Rehab vekseltryksmadras	200	120	27	0244-120-230	



# XXL-Rehab Comfort skummadras

Skummadras til forebyggelse af tryksår hos bariatriske brugere

XXL-Rehab Comfort skummadras er specielt udviklet til forebyggelse af tryksår hos bariatriske brugere, der har en ekstra bred plejeseng.

XXL-Rehab Comfort skummadras kan med fordel anvendes til den bariatriske bruger, som har brug for en madras, der giver maksimal komfort og stor trykaflastning uden at nedsætte brugerens funktionsniveau. Madrassen kan bruges ved behandling af tryksår op til stadie 2.

## Madrasen

- Er 18 cm høj og opbygget med et tykt bærelag af Heavy Duty PU-skum opskåret i fjedre, hvilket giver bedre trykaflastning end en almindelig skummadras. Øverst er der 3 cm Viscoelastisk skum, som giver god komfort og trykaflastning.

## Betræk

- Inkontinens betræk i PU.
- Bielastisk, åndbart, antibakterielt behandlet, antiallergisk og brandhæmmende.

MAX 325 kg

- Passer perfekt i plejesenge med 3-4 delt liggeflade
- Trykaflastende madras som samtidig sikrer, at brugers mobilitet bibeholdes





## XXL-Rehab Comfort skummadras

### Specifikationer

XXL-Rehab Comfort skummadras	
Brugervægt max.	325 kg
Længde	200 / 220 cm
Bredde	100 / 120 cm
Højde	18 cm
Madrassens vægt	12 / 13 kg
Anvendelig direkte på sengebund	Ja
Anvendelig til indstillelig sengebund	Ja
Brandhæmmende betræk	Ja
Inkontinens betræk	Ja
Allergivenligt betræk	Ja
Vask- og desinficerbart betræk	Ja
Aftageligt betræk	Ja
Madras	Viscoelastisk PUR skum/ Heavy Duty PU-skum
Betræk	100% polyuretan
ISO - klassifikation	ISO 18 12 18 - 25

#### Anvendes med fordel til...

- Bariatriske brugere som vejer op til 325 kg, og hvor man ønsker at bibeholde deres mobilitet, samtidig med de får en trykaflastende liggeflade.

Model	Længde cm	Bredde cm	Højde cm	Varenummer	HMI
XXI-Rehab Comfort Skummadras	200	100	18	0240-100-200	47696
XXI-Rehab Comfort Skummadras lang	220	100	18	0240-100-220	70143
XXI-Rehab Comfort Skummadras	200	120	18	0240-120-200	36579
XXI-Rehab Comfort Skummadras lang	220	120	18	0240-100-220	70144





## Indholdsfortegnelse

- 2-3 XXL-Rehab Plejeseng
- 4-5 XXL-Rehab 500 Hospitalsseng
- 6-7 XXL-Rehab Vekseltryksmadras
- 8-9 XXL-Rehab Comfort skummadras
- 10-11 XXL-Rehab Gulvforhøjer



# COBI REHAB<sup>®</sup>

The Positioning Company

**COBI REHAB**  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Danmark  
Tlf. +45 7025 2522  
[www.cobirehab.com](http://www.cobirehab.com)