



Cobi Cura X10 vekseltryksmadras

Vekseltryks helmadras til behandling og forebyggelse af tryksår til brugere med høj risiko for tryksår

Cobi Cura X10 er specielt udviklet til behandling af tryksår stadie 0-4 samt forebyggelse af tryksår.

Cobi Cura X10 kan med fordel anvendes på plejcentre og i hjemmeplejen til brugere, der er alment svækket eller midlertidigt stærkt svækket, og som har brug for en dyb og meget trykaflastende lejrning.

Madrasen kan gøres statisk, hvilket letter plejen af bruger i sengen. Er særdeles velegnet til genbrug på grund af det lukkede system, hvilket letter rengøringen.

Madrasen

- Består af 20 forstærkede luftceller (18 cm høj madras), hvilket sikrer at bruger kan få en dyb og dermed meget trykaflastende lejrning.
- Består af en 5 cm (på 13 cm høj luft celler) luft undermadras, som er integreret i betrækket, så tilsmudsning undgås.
- Midtersektionen er forsynet med luftperforeringer.
- Luftcellerne pumper op i en 1-2 cyklus, hvilket sikrer både bevægelse under bruger, og at peak pressure området flyttes. Tidscyklus kan ændres ved 0, 5, 10, 15, 20, 25 og 30 minutter.
- Madrassens luftceller er soft celler, som gør, at brugeren får en fantastisk liggekomfort. Soft cellerne yder en konstant komfort til kroppen og med deres lydløse materiale, får brugeren en uafbrudt nattesøvn.

Betræk

Cobi Cura X10 fås med Dartex betræk, som er strækbart i 4 retninger, glat og åndbart og med lav friktion.

Betrækket er inkontinens betræk og har en anti-bakteriel behandlet overflade.

Betrækket påmonteres via en lynlås, som er beskyttet mod utilsigtede indtrængninger af væsker og er desuden flammehæmmet. Kan afmonteres for vask og desinfektion.


Auto X10 pumpen

- Har Autofirm funktion som selv slår fra efter 20 minutter.
- Har Siddefunktion, hvilket er en stor fordel ved for eksempel lunge- og hjertesygge, som sidder meget op i sengen.
- Har audiovisuel alarm ved fejl som strømsvigt eller lufttab.
- Er forsynet med et tydelig og enkelt display med cyklus tid.
- Arbejder næsten lydløst.
- Indstiller sig automatisk i forhold til brugerens vægt. Med mulighed for manuel justering af vægt.

Kontraindikationer

- Personer med ustabile frakturer, eller personer med osteoporose bør ikke placeres på vekseltryk.

- Vekseltryks helmadras
- Indstiller sig automatisk i forhold til brugerens vægt
- Til forebyggelse og behandling af tryksår
- Særdeles velegnet til genbrug
- Let at rengøre

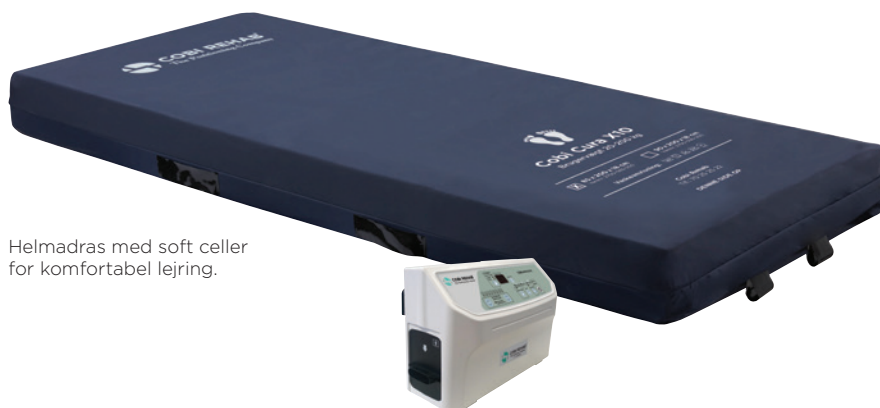

Helmadras med soft celler for komfortabel lejrning.

20-200 kg

Cobi Cura X10 vekseltryksmadras

Specifikationer

Cobi Cura X10 vekseltryksmadras	
Brugervægt	20-200 kg
Længde	200 cm
Bredde	85 / 90 cm
Højde	18 cm
Madrassens vægt	8 / 9 kg
Pumpens vægt	2,8 kg
Pumpens mål	32 x 24 x 13 cm
Sektions opdelt madras	Nej
Alarm ved lufttab	Ja
Alarm ved strømsvigt	Ja
Batteribackup	Nej
Lyntømningsfunktion	Ja
Statisk funktion	Ja
Anvendelig direkte på sengebund	Ja
Anvendelig til indstillelig sengebund	Ja
Brandhæmmende betræk	Ja
Inkontinens betræk	Ja
Allergivenligt betræk	Ja
Vask- og desinficerbart betræk	Ja
Tryksårsforebyggende stadie	0-4
Madrasbetræk	Dartex betræk: 42% polyuretan, 58% nylon/polyamid.
Celler	100% nylon med TPU laminering
Pumpe	ABS flamme resistent UL
ISO - klassifikation	ISO 18 12 18 - 28

Anvendes med fordel til...

- Brugere, der har tryksår.
- Brugere, der er mere sengeliggende end vanligt og hvor sygdomsforløbet ser ud til at være længerevarende.
- Brugere, der har brug for en dybere lejring.
- Kronisk syge for eksempel Crohn, hjertepatienter, sclerose patienter.



Model	Længde cm	Bredde cm	Højde cm	Varenummer	HMI
Cobi Cura X10 helmadras - 85 cm bred	200	85	18	2700-085-200	112300
Cobi Cura X10 helmadras - 90 cm bred	200	90	18	2700-090-200	00000

Kan fås i bredden 85 / 90 cm og 200 cm i længden.

Tilbehør					
Betræk til Cobi Cura X10	200	85	18	2700-999-030	-
Betræk til Cobi Cura X10	200	90	18	2700-999-031	-