



COBI REHAB®
The Positioning Company

Cobi lejringspuder

Hjælpemidler, der gør en forskel...



Cobi Søhest pude og
Cobi Finne pude mellem knæ



Scan koden og få
brugsanvisningen.

Serie 48094 fra htm-basen.dk

- Til særlige lejringsbehov
- Kurver sig omkring knoglefremspring og fordeler trykket
- Perfekt til lejrning i Semi-Fowler liggestilling
- Gør det nemt at lejre sideliggende
- Antibakterielt forseglede puder
- Aftagelige vaskbare betræk
- Giver sansestimuli

Bruges til

- Demente
- Bariatriske brugere
- Neurologiske skadede
- Geriatrik rehabilitering
- Brugere i palliative forløb.

Cobi lejringspuder

Flere funktioner i én og samme pude

Hver pude bruges til løsninger af flere forskellige positioneringsproblematikker, afhængigt af den enkelte brugers konkrete behov. Lejringspuderne er designet i samarbejde med specialenheder inden for demens og neurologiske skader.

Materialets gode kvalitet gør, at faconen holdes, hvilket betyder stabilitet samt god understøttelsesflade og trykfordeling.

Stor tyngde og anatomisk design

I designet af Cobi lejringspuder er der lagt vægt på, at puderne er fleksible og kropsnære. Pudernes tyngde gør, at lejringsen af brugeren forbliver stabil.

Anvendelig til mange patientgrupper

Puderne er velegnede til lejrings af bariatriske brugere, neurologisk skadede, demente, smertepatienter og brugere i palliative forløb, hvor få og selv små bevægelser kan udløse smerter.

Fælles for disse patientgrupper er, at mange af dem er i højrisikozonen for at udvikle vævsskade og tryksår.

Eksempler på lejrings

Cobi Søhest pude er den komplette sidelejringspude. Alle de nødvendige komponenter til god sidelejrings er samlet i én og samme pude.

Cobi Søhest pude kan også bruges sammen med Cobi Finne pude til frontlejrings.

Beroligende effekt

Udover at øge trykfordelingen kan puderne også bruges til mindske af spasticitet og give taktil stimuli, hvilket hjælper blandt andet demente. Den afgrænsende fornemmelse af kroppen, giver nemlig en beroligende effekt.

Konstruktion

Cobi lejringspuder er fremstillet af materialer, der skaber stabil lejrings og stor trykfordeling. Materialets sammensætning giver både taktile og proprioceptive input.

Pudernes stof er vandtæt, men samtidig åndbart. Stoffet er anti-bakterielt behandlet, uden brug af nano materialer. Puderne er lufttætte og fyldt med små Krøyer-kugler, granulat og vægtfylde, hvilket sikrer, at positioneringen holdes, og at puderne ikke ændrer facon.

Der fås to typer betræk, et hygiejnebetræk og et jerseybetræk. Hygiejnebetrækket er lavet af et strækbart materiale, som er anti-bakterielt forseglet. Betrækket er åndbart, vandtæt og brandhæmmende. Jerseybetrækket af 100% økologisk bomuld er ekstra blødt og strækbart.

Cobi deltager gerne i konkrete afprøvninger med brugere med komplicerede lejringsproblematikker.

Kontakt os på cobi@cobi.dk eller 70 25 25 22.



Cobi Universal pude



Cobi Universal pude



Cobi U-pude under overkrop,
Cobi Skøde pude under hovede,
Cobi Cylinder pude under knæ,
Cobi Finne pude under underben



Cobi Hæl/arm pude



Cobi Skøde pude




Cobi Hæl/arm pude



Cobi Skøde pude

Cobi lejringspuder

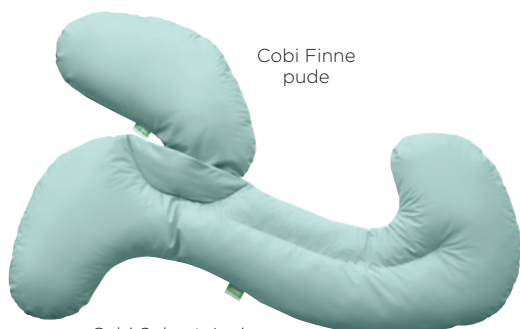

Cobi Finne
pude


Cobi Søhest Junior
pude



Cobi Flexi pude



Cobi Robust pude

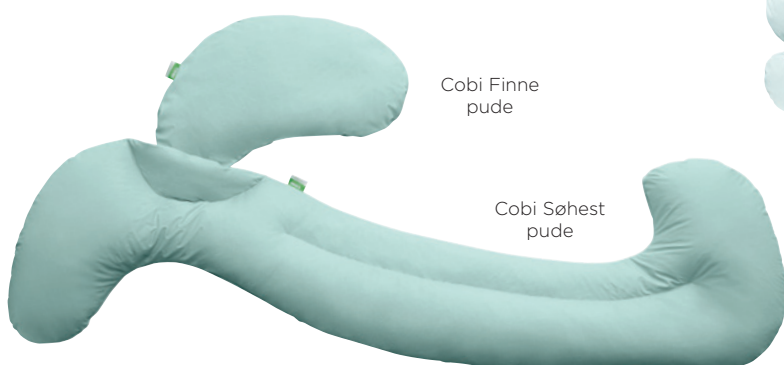

Cobi Finne
pude

Cobi Søhest
pude



Cobi H-pude



Cobi Cylinder pude
kort



Cobi Lille hovedpude




Cobi Stor hoved-
pude



Cobi Hæl/arm pude



Cobi Kile pude

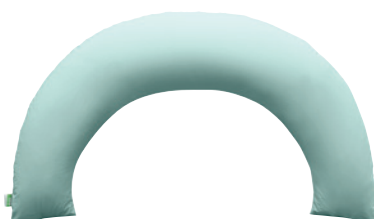

Cobi U-pude



Cobi Skøde pude



Cobi Universal pude

Kelvin Support puder



Kelvin Support
Arm/hånd/læg/hæl pude



Kelvin Support
Lille hovedpude



Kelvin Support
Mellem hovedpude



Kelvin Support
Stor hovedpude

Cobi lejringspuder

Cobi Søhest pude / Cobi Søhest Junior pude

Den komplette sidelejringspude. Alle de nødvendige komponenter til god sidelejrning er samlet i én og samme pude. Cobi Søhest pude kan også bruges sammen med Cobi Finne til frontlejrning.

Cobi Finne pude

Cobi Finne pude er ekstra tilbehør til Cobi Søhest pude og bruges til at give yderligere aflastning og til at positionere ankel og hæl.

Cobi Flexi pude

Cobi Flexi giver brugeren rigtig god kropsstøtte takket være dens udformning. Den kan også bruges som U-pude, og da enderne er syet i spids, kan den placeres tættere på kroppen i Semi-Fowler liggestilling.

Cobi Robust pude

Denne cylinderpude er 200 cm lang og 28 cm bred og har ekstra tyngde, hvilket gør puden velegnet til en tæt lejrning som Semi-Fowler liggestilling, eller ved 135° sideliggende/delvis bugleje.

Puden bruges også til agiterede brugere med behov for øget taktil stimuli og proprioceptiv afgrænsning.

Cobi H-pude

Cobi H-pude er en lejringspude, der kan bruges på et utal af måder. I sidelejrning positioneres hoftelæddet i neutral stilling, hvilket er relevant i lejrning af fx hofteopererede eller spastikere.

Når Cobi H-puden anvendes rygliggende, positioneres hoftelæddet i fleksion, og benene lejes støttet og stabilt. Puden kan desuden bruges i trænings- og behandlingsseancer.

Cobi Cylinder pude kort

En knæ- og hasepude, som er uundværlig, når der skal lejres i Semi-Fowler liggestilling og ved fleksion af knæet. Puden kan også bruges til ved sidelejrning, som stabilitet til knæene.

Cobi Lille hovedpude

Cobi lille hovedpude udfylder små hulrum i positioneringen, samtidig med at den understøtter. Cobi Lille hovedpude bruges også til at forebygge tryksår mellem knæene.

Cobi Stor hovedpude

Cobi Stor hovedpude bruges til rygstøtte ved lejrning i Semi-Fowler liggestilling. Puden giver god støtte og komfort samt et godt stabilt hold, når den bruges til positionering af hovedet i neutral nakkestilling.

Når puden bruges under læggene i rygliggende stilling, giver puden god trykaflastning til hælene.

Cobi Hæl/arm pude

Puden bruges til at løfte hælen fra madrassen ved behandling af tryksår. Puden bruges også, hvor hele underbenet er løftet for at undgå ødemdannelser.

Puden bruges også til at lejre en hemiplegisk arm eller til brugere med nedsat tonus.

Cobi Kile pude

Kile puden er udformet som en trekantet pude og kan benyttes til fleksible formål, som fx stabilisering foran og bag ryggen i sideleje. Brug af Cobi Kile pude foran kroppen giver øverste arm og skulder en god understøttelse i neutral stilling. I rygleje bruges Cobi Kile pude til at understøtte haserne, læg og lår.

Cobi U-pude (rede med flex arme)

U-formen gør denne pude velegnet som kropsstøtte. Puden kan enten placeres bag, foran eller rundt om brugeren. Kropsstøttepuden er en af grundstenene i Semi-Fowler liggestilling.

Cobi Skøde pude

Skøde pude bruges i den siddende stilling, hvor den urolige bruger har gavn af at sidde med "katten i sin favn". Puden bruges også til lejrning af hovedet og til at skabe stabilitet i den siddende stilling i sengen under lårene.

Cobi Universal pude

Universal pude bruges til hofteabduktion og til at mindske risikoen for hoftedislokation, når en bruger vendes fra ryg til sidelejrning. Derudover er puden velegnet til understøttelse af arm/skulder og forebyggelse af ødemdannelse.

Kelvin Support puder

Kelvin Support arm/hånd/læg/hæl pude

Puden bruges til lejrning af en hemiplegisk arm og til brugere med nedsat tonus. Puden bruges også til at løfte hælen fra madrassen og til behandlinger, hvor underbenet løftes for at undgå ødemdannelser.

Kelvin Support hovedpude - lille/mellem/stor

Hovedpuderne bruges til rygstøtte, når der lejres i Semi-Fowler liggestilling. Derudover giver hovedpuderne øget komfort, når de bruges som nakkestøtte.

Cobi lejringspuder

Specifikationer

Cobi lejringspuder	
Fyldmaterialer	3 mm Krøyer-kugler af ekspanderet polystyren. Gummigranulat til at skabe vægtfylde. Polyurethanskum (PU-skum) der opfylder ØKO-TEX® Standard 100. Fordelingen er tilpasset hver pude-type.
Pudeoverflade	Åndbart og vandtæt. Polyamid imprægneret med PU (polyurethan) og anti-bakterielt behandlet.
Hygiejnebetræk	Åndbart og vandtæt. Polyamid imprægneret med PU (polyurethan) og anti-bakterielt behandlet.
Jerseybetræk	100% økologisk bomuld
Rengøring	Begge betræk er vaskbare. Puderne kan rengøres med almindelige rengøringsmidler eller desinficeres.
ISO - klassifikation	ISO 09 07 06 - 02

Bruges til

- Demente
- Bariatriske brugere
- Neurologiske skadede
- Geriatrisk rehabilitering
- Brugere i palliative forløb.

Model	Længde cm	Bredde cm	Højde cm	Kg	Varenummer	HMI
Cobi lejringspudesæt komplet med taske					0400-000-000	
Cobi Cylinderpude pude kort	62	29	20	1,7	0400-064-000	101214
Cobi Flexi pude	194	27	15	3,7	0400-068-000	101215
Cobi Robust pude	200	28	28	6,0	0400-070-000	101216
Cobi Hæl/arm pude	40	28	11	0,5	0400-060-000	101218
Cobi Universal pude	58	39	22	1,7	0400-054-000	101220
Cobi Søhest pude	186	51	12	5	0400-056-000	101221
Cobi Søhest Junior pude	127	27	12	2,5	0400-057-000	101282
Cobi Finne pude	58	28	8	0,6	0400-058-000	101222
Cobi U-pude	88	94	17	2,7	0400-072-000	101225
Cobi Skøde pude	55	54	12	1,2	0400-050-000	101226
Cobi Lille hovedpude	39	25	8	0,3	0400-048-000	103833
Cobi Stor hovedpude	58	40	13	0,9	0400-049-000	103834
Cobi H-pude	51	30	30	1,8	0400-074-000	103835
Cobi Kile pude	40	50	14	1,1	0400-066-000	103836

Tilbehør	Hygiejnebetræk	Jerseybetræk
Pudebetræk Cobi Cylinder pude kort	0400-064-010	0400-064-015
Pudebetræk Cobi Flexi pude	0400-068-010	0400-068-015
Pudebetræk Cobi Robust pude	0400-070-010	0400-070-015
Pudebetræk Cobi Hæl/arm pude	0400-060-010	0400-060-015
Pudebetræk Cobi Universal pude	0400-054-010	0400-054-015
Pudebetræk Cobi Søhest pude	0400-056-010	0400-056-015
Pudebetræk Cobi Søhest Junior pude	0400-057-010	0400-057-015
Pudebetræk Cobi Finne pude	0400-058-010	0400-058-015
Pudebetræk Cobi U-pude	0400-072-010	0400-072-015
Pudebetræk Cobi Skøde pude	0400-050-010	0400-050-015
Pudebetræk Cobi Lille hovedpude	0400-048-010	0400-048-015
Pudebetræk Cobi Stor hovedpude	0400-049-010	0400-049-015
Pudebetræk Cobi H-pude	Intet betræk	Intet betræk
Pudebetræk Cobi Kile pude	0400-066-010	0400-066-015
Opbevaringstaske til Cobi lejringspuder	0400-080-000	0400-080-000

Kelvin Support puder

Specifikationer

Kelvin Support puder	
Kuglemateriale	Ekspanderet polystyren
Kuglestørrelse	Ca. 1 mm
Pudeoverflade	Polyester, polyuretan polycarbonat
Pudebetræk	67% bomuld, 33% polyester
Rengøring	Pudebetrækket er vaskbart. Puderne kan rengøres med almindelige rengøringsmidler eller desinficeres.
ISO - klassifikation	ISO 09 07 06 - 02

Bruges til

- Demente
- Neurologiske skadede
- Geriatrisk rehabilitering
- Brugere i palliative forløb.

Model	Længde cm	Bredde cm	Varenummer	HMI
Kelvin Support Arm/hånd/læg/hæl	27	27	3001-027-027	88785
Kelvin Support Lille hovedpude	40	40	3001-040-040	88786
Kelvin Support Mellem hovedpude	40	60	3001-040-060	88787
Kelvin Support Stor hovedpude	40	70	3001-040-070	88788

Tilbehør			
Microfiberbetræk, til pudestørrelse 30 x 30 cm			3001-999-003
Microfiberbetræk, til pudestørrelse 40 x 40 cm			3001-999-002
Microfiberbetræk, til pudestørrelse 40 x 65 cm			3001-999-001





COBI REHAB[®]

The Positioning Company

COBI REHAB

Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark

Tlf. +45 7025 2522

www.cobirehab.com