



COBI REHAB®
The Positioning Company

Kelvin kørestol

Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor | **Bendix** ryg



Indlæs QR-koden for tekniske specifikationer

Scan koden og få
brugsanvisning m.m.

- Bliver tilpasset til den enkelte bruger
- Giver tryghed og stimuli
- Bidrager til større livskvalitet
- Øger muligheden for deltagelse i aktiviteter
- Kan let overgå og tilpasses ny bruger.

Bruges til

- Brugere med stærk nedsat funktionsniveau som følge af fx hemiplegi, demens, sklerose og Huntingtons sygdom
- Smertepatienter.

Kelvin kørestol

Den enkle løsning, når standarden ikke længere rækker

Kelvin kørestol kan tilpasses den enkelte bruger og giver øget komfort. Den individuelle tilpasning og den øgede komfort er med til at højne både aktivitetsniveauet, funktionsniveauet og livskvaliteten.

Konstruktion

Kelvin kørestolen er opbygget af puder fyldt med latex og Krøyer-kugler. Kørestolen kan indstilles efter brugerens hofte-, knæ- og ankelled. Kørestolen kan desuden tiltes op til 45°, hvilket hjælper ved fx forflytninger.

De mange tilpasningsmuligheder sikrer brugeren en optimal støtte fra isse til hæl, trods deformiteter og kontrakturer.

Kørestolen er konstrueret med flexarme, som understøtter brugerens arme og skaber tryghed, ro og komfort.

Større livskvalitet

Den tryghed og ro, som brugeren får via den komfortable Kelvin kørestol er med til at højne funktionsniveauet. Med det øgede funktionsniveau kommer også en højere grad af fleksibilitet, livskvalitet og lyst til at indgå i sociale relationer eller aktiviteter.

Fleksibilitet

Kelvin kørestolen er opbygget af en lang række puder og dele, som er nøje afstemt med hinanden. Mængden af fyld i hver eneste pude kan justeres, så den passer til det sted på kroppen, som puden skal understøtte. Mængden af generende sømme er begrænset.

Kørestolen kan opgraderes med abduktionspude, bord og forskellige nakkestøtter, benstøtter og armlæn. Alt tilbehør tilpasses den enkelte bruger.

Kelvin kørestolen kan genbruges, fordi det store udvalg af tilbehør gør det nemt at gentilpasse kørestolen. Gentilpasninger bør altid foregå i samarbejde med konsulenter fra Cobi Rehab.

Kelvin kørestolen kan også senere påmonteres el-tilt og/eller hjælpemotor (se Kelvin Aura). Kontakt Cobi Rehab på 70 25 25 22 og hør mere om de to løsninger.






- Højner livskvaliteten
- Øger aktivitets- og funktionsniveauet
- Høj komfort
- Individuel tilpasning
- Skaber tryghed og ro

125 kg

Kelvin kørestol

Stolens anatomi – pudenumre

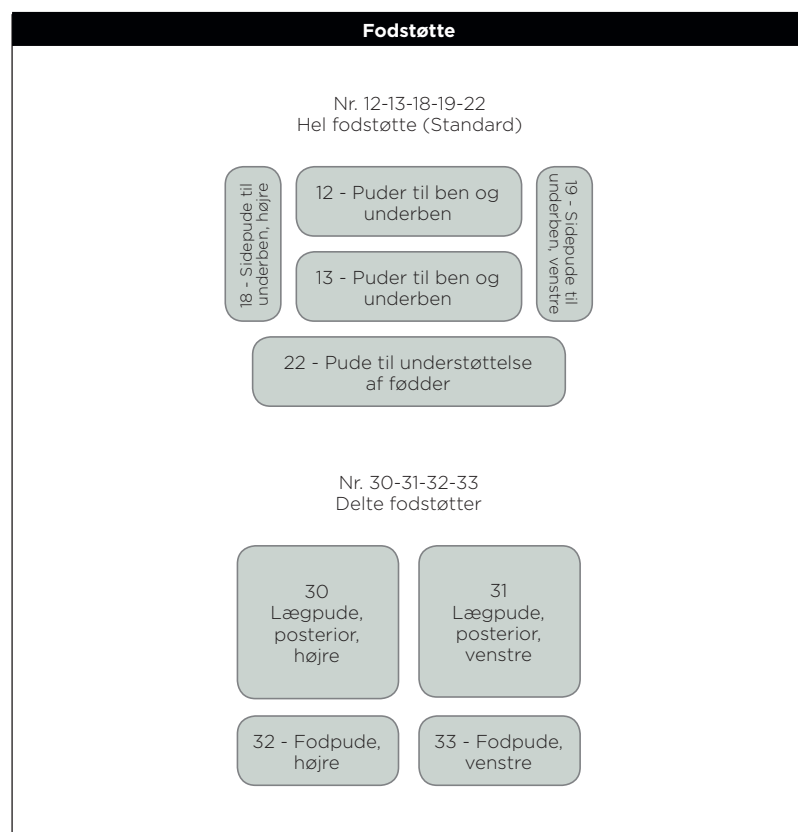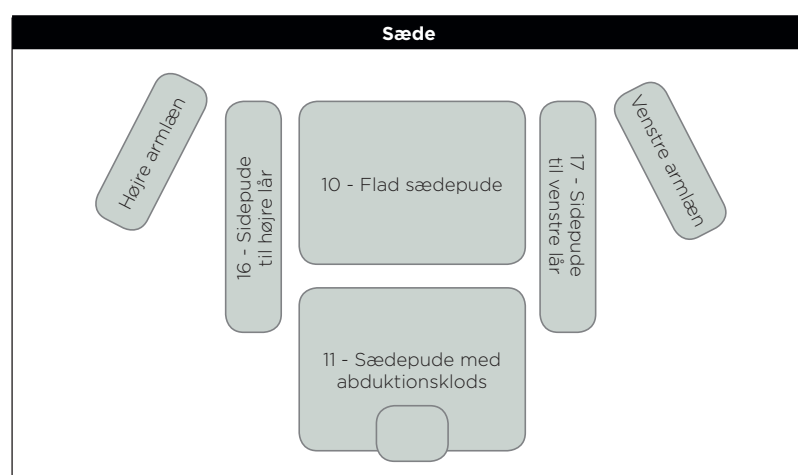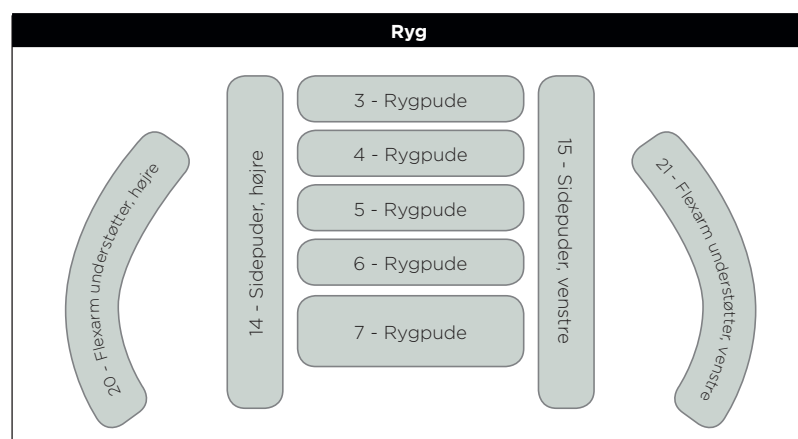

Pudenr	Pudebeskrivelse
1	Kelvin hovedstøtte
2	Ryglænsforlænger
3 - 8	Rygpuder
10	Flad sædepude
11	Sædepude med abduktionsklods
12 - 13	Pude til ben og underben
14 - 15	Sidepuder
16 - 17	Sidepuder til lår
18 - 19	Sidepuder til underben
20 - 21	Flexarm understøtter
22	Pude, der understøtter begge fødder
23 - 24	Hårde armlæn med puder
28 - 29	Lægstøtter, side
30 - 31	Lægpude, posterior
32 - 33	Fodpude



Kelvin kørestol

Specifikationer

Kelvin kørestol	
Brugervægt max.	125 kg
Vægt	Ca. 47 kg
Sædetilt bagud	0 - 45°
Nakkestøtte	Ja, flere typer
Fodstøtter	Ja, flere typer
Hjælpe motor kan eftermonteres	Ja
Indstillelige skubbehåndtag	Ja
Indstillelig i hofte-, knæ- og ankelled	Ja
Åndbart- og vaskbart betræk	Ja
Stel	Lakeret aluminium
Hjul	Massive
Pudeoverflade	PU
Pudefyld	Latex med Krøyer-kugler

Bruges til

- Brugere med stærk nedsat funktions-niveau som følge af fx hemiplegi, demens, sklerose og Huntingtons sygdom
- Smertepatienter.

Model	Sædebredde cm	Sædedybde cm	Total bredde cm	Ryglænsenhøjde cm	Varenummer	HMI
Kelvin S 40	34-40	40	63	55	0300-140-000	36013
Kelvin Aura med hjælpe motor S 40					0301-140-000	86758
Kelvin S 48	34-40	48	63	55	0300-148-000	64586
Kelvin Aura med hjælpe motor S 48					0301-148-000	86762
Kelvin M 40	40-46	40	63	55	0300-240-000	64587
Kelvin Aura med hjælpe motor M 40					0301-240-000	86763
Kelvin M 48	40-46	48	63	55	0300-248-000	36496
Kelvin Aura med hjælpe motor M 48					0301-248-000	86764
Kelvin M 56	40-46	56	63	55	0300-256-000	64588
Kelvin Aura med hjælpe motor M 56					0301-256-000	87428
Kelvin L 48	46-50	48	68	55	0300-348-000	36497
Kelvin Aura med hjælpe motor L 48					0301-348-000	86765
Kelvin L 56	46-50	56	68	55	0300-356-000	64589
Kelvin Aura med hjælpe motor L 56					0301-356-000	86766

Tilbehør	Varenummer
Nakkestøtte Edison multijusterbar	0300-999-043
Nakkestøtte standard S	0300-999-040
Nakkestøtte standard M	0300-999-041
Nakkestøtte standard L	0300-999-042
Nakkestøttebetræk standard S	0300-999-030
Nakkestøttebetræk standard M	0300-999-031
Nakkestøttebetræk standard L	0300-999-032
Nakkestøttebetræk Edison	0300-999-033
Flexarm højre	0300-999-051H
Flexarm venstre	0300-999-051V
Flexarm med tyngde højre	0300-999-055H
Flexarm med tyngde venstre	0300-999-055V
Armlæn højdeindstilleligt højre	0300-999-062H
Armlæn højdeindstilleligt venstre	0300-999-062V
Benstøtter eleverbare standard sæt S Husk monteringskit	0300-999-070
Benstøtter eleverbare standard sæt M Husk monteringskit	0300-999-071
Benstøtter eleverbare standard sæt L Husk monteringskit	0300-999-072

Tilbehør	Varenummer
Fodstøtter to-delt sæt S	0300-999-076
Fodstøtter to-delt sæt M	0300-999-077
Fodstøtter to-delt sæt L	0300-999-078
Regnslag størrelse S	0300-999-036
Regnslag størrelse M	0300-999-037
Regnslag størrelse L	0300-999-038
Stretch-cover betræk One Size	0300-999-017
Stretch-cover betræk standard L56	0300-999-018
Stretch-cover betræk standard til flexarm/stk.	0300-999-020
Komfort betræk S40	0300-999-023
Komfort betræk S48	0300-999-024
Komfort betræk M40	0300-999-025
Komfort betræk M48	0300-999-026
Komfort betræk M56	0300-999-027
Komfort betræk L48	0300-999-028
Komfort betræk L56	0300-999-029
Bord universal	0100-999-001
Lægforlænger modul	0300-999-260

Kelvin kørestol

Stor genanvendelighed
- alle dele kan udskiftes



Kelvin Aura kørestol med hjælpemotor

Fordi udendørsaktiviteter højner livskvaliteten

Kelvin Aura har en maksimal hastighed på 6 km/t og gør det muligt for brugere med nedsat funktionsniveau at komme lettere rundt til aktiviteter både indendørs og udendørs. Med hjælpemotor bliver det også lettere for pårørende og plejepersonale at inddrage udendørsarealer til aktiviteter for stærkt bevægelseshæmmede brugere.

- Støjsvag hjælpemotor
- Let at betjene
- Nem at manøvrere
- Bidrager til større livskvalitet og flere aktivitetsmuligheder.

Bruges til

- Bevægelseshæmmede brugere, hvor udendørsliv er højt prioriteret.

Kelvin Aura bruges i hjemmet, på plejcentre og på specialinstitutioner.



Kelvin Aura kørestol med integreret hjælpemotor

Kelvin Aura med hjælpemotor

Maksimal sikker hældning	7°
Maksimal hastighed	6 km/t.
Batteritype	Li-ion, 36 V
Batterikapacitet	11,6 Ah
Batteriets vægt	3 kg
Opladningstid	6 timer til maks. opladning
Rækkevidde	18 km*
Opladerindgang	100 - 240 V 50/60 Hz
Opladerudgang	24 V DC/2,35 A
Omgivende temperatur ved brug	-5° C til + 45° C
Omgivende temperatur ved opladning	+10° C til +40° C
Omgivende temperatur ved opbevaring og transport	-10° C til +60° C

Let betjening med vippekontakt.

Kør frem: Tryk vippekontakt ned.
Bak: Tryk vippekontakt op.



Bendix ryg

Bendix ryg er en all around ryg, der kan monteres på de fleste kørestole.

Bendix ryggen er anvendelige til mange patientgrupper, herunder hemiplegiske brugere, smertepatienter og brugere med fx sklerose eller Huntingtons sygdom.

Bendix ryggen er opbygget efter de samme principper som Kelvin kørestolen. Det vil sige, at der kan lægges ekstra støtte ind efter behov, samtidig med at der i ryggen kan gives plads til kyfoser, skolioser og lignende. Bendix ryggen giver også tryk og sansestimulering.

Bendix ryggen er forsynet med fem puder i ryggen, som alle kan tilpasses individuelt. Derudover er der to puder på hver side støtte, som også kan tilpasses individuelt. Det giver en præcis opbygning af ryggen, så der opnås maksimal aflastning af udsatte områder.

Der kan løbende laves tilpasninger af ryggen, også mens brugeren sidder i kørestolen.

Ryggen kan overgå og gentilpasses til en anden bruger.

Bendix ryggen fås i fire forskellige størrelser: XS, S, M og L.



Bendix ryg	
Flexarme	Ja
Nakkestøtte	Ja, flere typer
Åndbart- og vaskbart betræk	Ja
Pudeoverflade	PU
Pudefyld	Latex med Krøyer kugler

- Individuel tilpasning
- Løbende tilpasninger kan foretages
- Kan gentilpasses anden bruger
- Kompatibel med flexarme fra Kelvin kørestolen
- Kompatibel med Kelvin nakkestøtte.

Model	Rygbredde indvendig cm	Passer til sædebredde cm	Varenummer	HMI
Bendix ryg str. XS	30	37	0302-999-001	74648
Bendix ryg str. S	35	42	0302-999-002	74649
Bendix ryg str. M	40	47	0302-999-003	74650
Bendix ryg str. L	45	52	0302-999-004	74651

Tilbehør		
Betræk til Bendix ryg str. XS	0302-999-011	
Betræk til Bendix ryg str. S	0302-999-012	
Betræk til Bendix ryg str. M	0302-999-013	
Betræk til Bendix ryg str. L	0302-999-014	

Bruges til

- Brugere med nedsat fysisk funktionsniveau, som følge af fx. hemiplegi, demens, sklerose eller Huntingtons sygdom
- Smertepatienter.



COBI REHAB[®]

The Positioning Company

COBI REHAB

Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf. +45 7025 2522
cobirehab.com