



COBI REHAB®
The Positioning Company

Swing kørestol

Opnå naturlig ro og tryghed hos urolige brugere med gyngestolens stimulering af den vestibulære sans.



Fås med flexarme



Scan koden og få adgang
til Swing på HMI-basen.

- Sansestimulerende hjælpemiddel
- Høj komfort
- Individuel tilpasning
- Skaber tryghed og ro
- Kan højdejusteres

Bruges til

- Immobiler brugere med ukontrollerede bevægelser og motorisk uro
- Brugere med gang- og standfunktion.

Swing kørestol

Swing er en kørende gyngestol til brugere med ukontrollerede bevægelser og motorisk uro. Gyngefunktionen bidrager til flere bevægelsesmuligheder og færre spændinger.

Konstruktion

Swing minder i sin konstruktion om vores to andre kørestole Kelvin og Cumulix. Men den gemmer på en fantastisk feature, som ved første øjekast er let at overse. Swing er en kørende gyngestol!

I bundrammen sidder der to solide bladfjedre, som kan justeres sammen med kørestolens højde, så de passer til brugerens gyngemønster.

En bremse på kørestolen kan stoppe kørestolens gyng bevægelser.

Muligheden for at højdejustere kørestolen gør den meget anvendelig til brugere med gang- og standfunktion. Med indstilling til lav siddehøjde kan denne type brugere selv komme ind og ud af kørestolen.

Effekt

At aktivere en gyngestol er en bevægelse, der for de fleste menneskers vedkommende er automatiseret. Det gør, at brugere af Swing hurtigt og nemt kan få gavn af gyng bevægelsens stimulering af den vestibulære sans.

Vestibulær stimulation i kroppens længderetning, beroliger og hjælper til stimuli af balanceorganet i det indre øre.

Swingstolens design hjælper til en behagelig afgrænsning af kroppen, mens pudefyldet i sæde-, læg- og fodpudeindsatsen stimulerer de proprioceptive og taktile sanser.

Fleksibilitet

Swing kørestolen er opbygget af to pudegrupper; en komplet sædeindsats og en komplet læg- og fodpudeindsats. Flexarme kan monteres i hver side af kørestolen. Flexarmene understøtter brugerens arme og skaber tryk, ro og komfort.

Mængden af fyld (latex og små Krøyer-kugler) i hver eneste pude kan justeres, så den passer præcis til det sted på kroppen, hvor der er behov for støtte.

Swing kørestolen kan genbruges, fordi det store udvalg af tilbehør gør det nemt at gentilpasse kørestolen.

Gentilpasninger bør altid foregå i samarbejde med konsulenter fra Cobi Rehab.

Kontakt Cobi Rehab på 70 25 25 22 for at høre mere om gentilpasninger og specialløsninger.




- Kørende gyngestol
- Sikrer vestibulær stimulation
- Justerbare puder
- Specialløsninger muligt

125 kg

Swing kørestol

Kørestolens anatomi – pudenumre

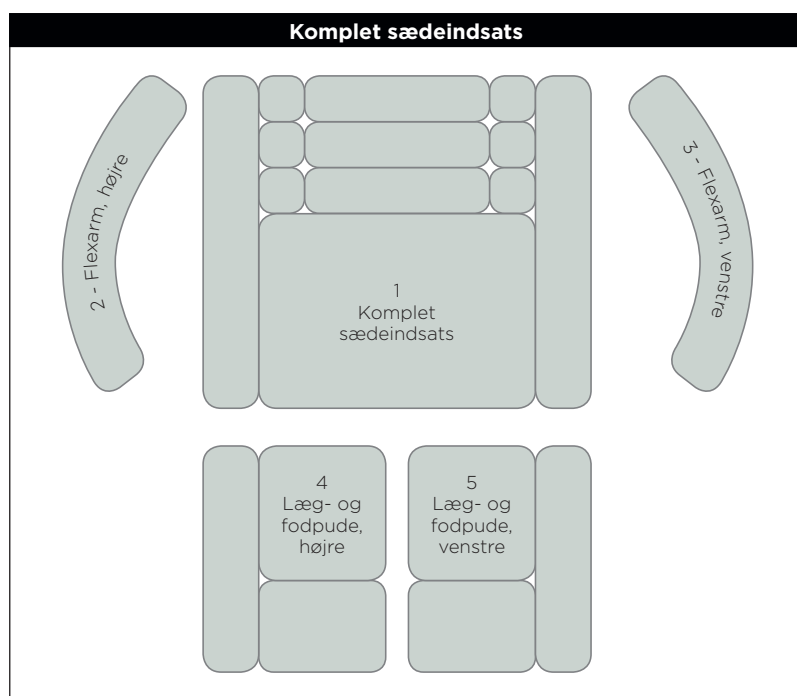

Pudenr	Pudebeskrivelse
1	Komplet sædeindsats
2	Flexarm, højre
3	Flexarm, venstre
4	Læg- og fodpude, højre
5	Læg- og fodpude, venstre



Swing kørestol

Specifikationer

Swing kørestol	
Brugervægt max.	125 kg
Vægt	Ca. 39 kg
Sædetilt bagud	Nej
Nakkestøtte	Ja, flere typer
Fodstøtter	Ja, flere typer
Hjælpe motor kan eftermonteres	Nej
Indstillelig skubbebøjle	Nej
Indstillelig i knæ- og ankelled	Ja
Højdejustering	Ja, (41-47 cm)
Åndbart- og vaskbart betræk	Ja
Stel	Lakeret aluminium
Hjul	Massive
Pudeoverflade	PU
Pudefyld	Latex med Krøyer-kugler

Tilbehør

En del af tilbehøret til Swing kørestol er kompatibel med tilbehøret til Kelvin kørestolen.

Model	Sædebredde cm	Sædedybde cm	Total bredde cm	Ryglæns-højde cm	Varenummer	HMI
Swing kørestol S 48	34-40	48	70	60	0309-148-000	121099
Swing kørestol M 48	40-46	48	70	60	0309-248-000	121101
Swing kørestol L 48	46-52	48	70	60	0309-348-000	121102

Tilbehør	Varenummer
Nakkestøtte Edison multijusterbar	0300-999-043
Nakkestøtte standard S	0300-999-040
Nakkestøtte standard M	0300-999-041
Nakkestøtte standard L	0300-999-042
Nakkestøttebetræk standard S	0300-999-030
Nakkestøttebetræk standard M	0300-999-031
Nakkestøttebetræk standard L	0300-999-032
Nakkestøttebetræk Edison	0300-999-033
Flexarm højre	0300-999-051H
Flexarm venstre	0300-999-051V
Flexarm med tyngde højre	0300-999-055H
Flexarm med tyngde venstre	0300-999-055V

Tilbehør	Varenummer
Armlæn vinkeljusterbar højre	0300-999-067H
Armlæn højdeindstilleligt venstre	0300-999-067V
Benstøtter eleverbare standard sæt L Husk monteringskit	0300-999-072
Fodstøtter to-delt sæt L	0300-999-078
Regnslag størrelse L	0300-999-038
Stretch-cover betræk One Size	0300-999-017
Stretch-cover betræk standard til flexarm/stk.	0300-999-020
Komfort betræk L48	0300-999-028
Bord universal	0100-999-001

Udviklingen af den nye Swing kørestol bygger på et tæt samarbejde mellem Life & Mobility som producent og os i Cobi Rehab som løbende bidragsydere af input til udvikling og forbedringstiltag.

Den oprindelige Vario Swing kørestol blev udfaset af Life & Mobility omkring år 2006 og har siden da været savnet blandt Cobi Rehabs kunder. Derfor har vi i samarbejde med Life & Mobility "genoplivet" kørestolen i en endnu bedre variation end den oprindelige, og det er vi både glade og stolte over.

Swing tilpasses i brugeren – ikke omvendt

Det er vigtigt, at vi lærer af vores erfaringer fra og med brugerne af vores hjælpemidler. Hjælpemidler skal være tilpasset brugeren og ikke den anden vej rundt. Denne holdning kræver et tæt samarbejde mellem producent, os i Cobi Rehab og ikke mindst jer, kunder og brugere.

Når det tætte parløb fungerer, kan vi bedre sikre os, at hjælpemidlet har den ønskede og tiltænkte effekt. Swing kørestolen er et godt eksempel på et velfungerende samarbejde på tværs af faggrupper og brugere. Vi håber, at I også fremover vil bidrage med feedback på Swing kørestolen, så kørestolen som hjælpemiddel fortsætter med at bringe ro, tryghed og forbedret livskvalitet for brugerne.

Swing kørestol

Swing forfra
uden læg- og fodpuder



Swing fra siden
uden læg- og fodpuder



Swing bagfra
uden nakkestøtte, læg- og fodpuder



Swing forfra med flexarme



Swing fra siden uden flexarme



Swing bagfra med nakkestøtte





COBI REHAB[®]

The Positioning Company

COBI REHAB

Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf. +45 7025 2522
cobirehab.com